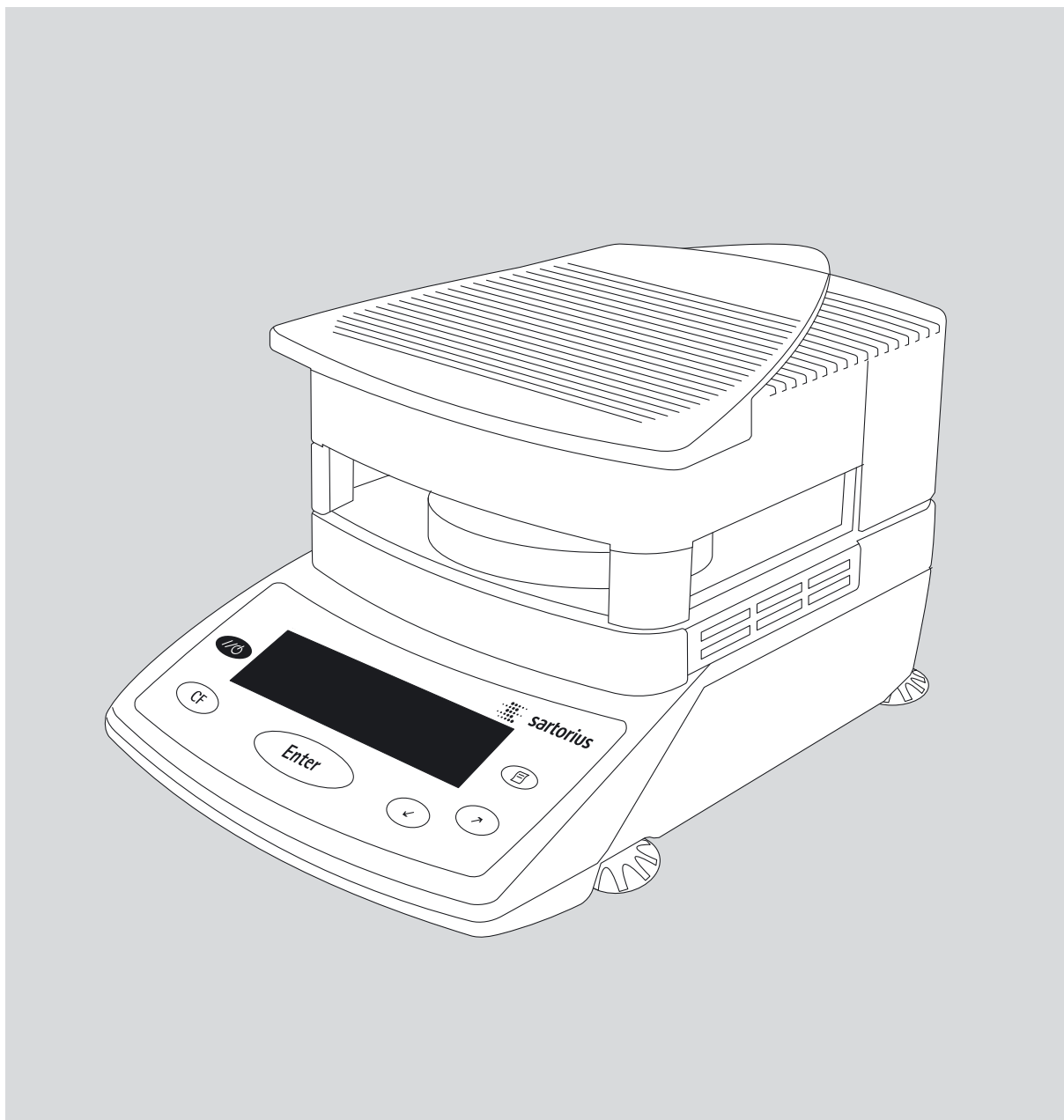


Istruzioni per l'uso

# Analizzatore d'umidità Sartorius

Modello MA150

Analizzatore d'umidità elettronico



## Uso previsto

L'analizzatore d'umidità MA viene impiegato per l'analisi veloce e affidabile dell'umidità di materiali liquidi, pastosi e solidi, basandosi sul metodo della termogravimetria.

L'analizzatore d'umidità velocizza le operazioni di routine grazie alle seguenti caratteristiche:

- Tempi di analisi veloci, elevata riproducibilità, essiccazione delicata e uniforme del campione data dall'utilizzo del radiatore ceramico o al quarzo.
- Metodo di spegnimento dell'analisi completamente automatico, semiautomatico oppure a intervalli di tempo
- Scelta del programma di essiccazione configurato e memorizzato dall'operatore (massimo 20 programmi)

L'analizzatore d'umidità si adatta in modo eccellente come strumento di misura in sistemi di controllo della produzione e del controllo delle merci in entrata grazie alle seguenti caratteristiche:

- Costruzione compatta di piccole dimensioni e di minimo ingombro
- Copertura ribaltabile sperimentata, manuale, con ampio angolo di apertura per un accesso ottimale alla camera per campioni
- Controllo comodo e preciso dello strumento di misura, ispezione e prova secondo le norme DIN/ISO grazie al peso di regolazione esterno e al set di regolazione della temperatura
- Registrazione conforme alle norme ISO/GLP con protocollo di analisi configurabile e protocollo per la regolazione della temperatura e del sistema di pesata
- Protezione dei parametri di essiccazione contro modifiche non autorizzate mediante una password
- Ampia gamma di accessori, per es. copertina di protezione per la tastiera, filtri in fibra di vetro, set di sostituzione dei pannelli, stampante esterna, software per PC per la rilevazione dei dati di analisi e la rappresentazione della curva di essiccazione (in parte opzionale)

L'analizzatore d'umidità soddisfa le esigenze più elevate riguardo la precisione dei risultati di pesata grazie alle seguenti caratteristiche:

- Una lettura perfettamente chiara in ogni condizione di luce e la riduzione degli errori di lettura grazie al display retroilluminato
- Facile pulizia della camera per campioni e protezione del sistema di pesatura grazie all'anello di protezione contro le correnti d'aria estraibile

### Spiegazione dei simboli

In questo manuale d'istruzioni sono stati impiegati i seguenti simboli:

- indica i consigli per l'utilizzo
- precede i consigli per l'utilizzo relativi a operazioni che vanno eseguite soltanto in determinate condizioni
- > descrive cosa accade dopo l'esecuzione di un'operazione
- precede una voce di enumerazione
- ⚠ indica un pericolo

---

# Indice

<b>2</b>	<b>Uso previsto</b>	<b>46</b>	<b>Messaggi di errore</b>
<b>3</b>	<b>Indice</b>	<b>48</b>	<b>Cura e manutenzione</b>
<b>4</b>	<b>Istruzioni di sicurezza e avvertenze</b>	48	Servizio
<b>5</b>	<b>Messa in funzione</b>	48	Riparazioni
5	Equipaggiamento fornito	48	Pulizia
6	Visione d'insieme dello strumento	49	Controllo di sicurezza
7	Collegamento alla rete	49	Smaltimento
8	Livellamento dello strumento	<b>50</b>	<b>Prospetto</b>
8	Accensione dello strumento, apertura e chiusura della camera per campioni	50	Dati tecnici
<b>9</b>	<b>Sistema di funzionamento</b>	51	Accessori
9	Tasti	52	Dichiarazione di conformità
10	Funzionamento e funzione di analisi e test	53	Registro delle parole chiave
11	Funzionamento del menù		<b>Allegato</b>
11	Uscita dati		Introdurre la password generale
12	Messaggi di errore		Istruzioni in breve
12	Salvataggio dei dati		
<b>13</b>	<b>Impostazioni</b>		
13	Impostazione della lingua		
14	Impostazione dei parametri dello strumento		
15	Entrata o modifica della password		
17	Parametri dello strumento (prospetto)		
18	Informazioni specifiche dello strumento		
<b>19</b>	<b>Nozioni generali</b>		
21	Preparazione		
21	– Configurazione in base al sistema di analisi esistente		
22	– Preparazione del campione		
<b>24</b>	<b>Modo di analisi</b>		
24	Impostazione dei parametri di essiccazione		
24	– Parametri di essiccazione (prospetto)		
27	Esempio		
31	Funzioni di regolazione «isoTEST»		
31	Regolazione del riscaldamento		
31	Regolazione del sistema di pesata		
35	Test dell'hardware		
37	Uscita dati		
37	Display		
39	Interfaccia di comunicazione		
40	Formato dei dati in uscita		
42	Formato dei dati in entrata		
44	Schema di assegnazione dei pin		
45	Schema di collegamento		

# Istruzioni di sicurezza e avvertenze

Lo strumento è conforme alle direttive e norme per gli strumenti elettrici, la compatibilità elettromagnetica e le prescrizioni di sicurezza date. Un uso improprio dello strumento può causare dei danni a persone e cose.

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'installazione prima di rendere operativo lo strumento. Si eviteranno in tal modo eventuali danni all'apparecchio stesso. Conservare il manuale d'istruzioni.

Osservare le seguenti indicazioni per un funzionamento dell'analizzatore d'umidità sicuro e senza problemi:

- ⚠ Utilizzare l'analizzatore d'umidità esclusivamente per la determinazione dell'umidità di campioni. Ogni utilizzo improprio dello strumento può causare dei danni a persone e danneggiare l'apparecchio o altri oggetti.
- ⚠ Non utilizzare l'apparecchio in luoghi soggetti a pericolo di esplosione e adoperarlo solo rispettando le indicazioni sulle condizioni ambientali riportate in questo manuale.
- ⚠ Non utilizzare sostanze infiammabili o soggette a pericolo di esplosione come campioni per l'analisi dell'umidità.
- ⚠ In caso d'impiego di apparecchi elettrici su impianti e in condizioni ambientali chiamate a soddisfare particolari requisiti di sicurezza deve essere rispettato quanto prescritto dalle relative disposizioni d'installazione vigenti nel Vostro Paese.
- Lo strumento deve essere utilizzato solo da personale qualificato che conosce le proprietà/caratteristiche del campione utilizzato.
- ⚠ Prima della messa in funzione iniziale controllare se il voltaggio corrisponde alla tensione di rete (vedi il capitolo «Messa in funzione», sezione «Collegamento alla rete»).
- Lo strumento è fornito con un cavo di alimentazione dotato di un conduttore di protezione.
- Lo strumento può essere spento estraendo il cavo di alimentazione solo se non è sotto tensione.
- Il cavo di alimentazione deve essere installato in modo da evitare il contatto con superfici molto calde dello strumento.

- Usare solo cavi di prolunga che corrispondono alle norme e che possiedono un conduttore di protezione.
- È vietata un'interruzione del conduttore di protezione!

- Utilizzare accessori e opzioni Sartorius che sono adattati in modo ottimale allo strumento.

Avvertenza per l'installazione:

L'utente risponde in prima persona di qualsiasi modifica apportata all'apparecchio così come della realizzazione dei collegamenti con cavi o apparecchi non forniti da Sartorius ed è tenuto a eseguire i dovuti controlli e le eventuali correzioni. Su richiesta, Sartorius fornisce indicazioni sulle caratteristiche di funzionamento (ai sensi delle succitate norme sulla immunità ai disturbi).

- Proteggere lo strumento dall'umidità
- Se lo strumento o il cavo di alimentazione presentano danni visibili: staccare l'alimentazione elettrica e assicurare lo strumento contro un eventuale utilizzo.

- ⚠ Pulire lo strumento attenendosi alle norme di pulizia (vedi il capitolo «Cura e manutenzione»)

Non aprire lo strumento. Se i sigilli di sicurezza vengono violati decadono i diritti di garanzia.

Nel caso sorgessero dei problemi con l'apparecchio:

- rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica Sartorius di competenza



## Avvertenza contro il calore!

- Rispettare la seguente distanza e lo spazio libero per evitare l'accumulo di calore e un surriscaldamento:
  - 20 cm attorno allo strumento
  - 1 m sopra lo strumento
- Non lasciare materiali infiammabili sotto, vicino o sullo strumento in quanto l'area attorno all'unità di riscaldamento si scalda
- Attenzione nel togliere il campione: il campione stesso, l'unità di riscaldamento e il contenitore del campione usato possono essere ancora molto caldi
- Evitare l'accumulo di calore

## Pericolo per persone o cose lavorando con campioni particolari:



Incendio



Esplosione

- Sostanze infiammabili o esplosive
- Sostanze che contengono solventi
- Sostanze che durante l'essiccazione emettono gas o vapori infiammabili o esplosivi

In alcuni casi è possibile l'utilizzo dell'analizzatore d'umidità in un luogo di lavoro dove viene fatto affluire azoto per evitare che i vapori emessi vengano in contatto con l'ossigeno dell'aria. L'utilizzo di questo metodo deve essere controllato caso per caso in quanto l'installazione dello strumento in un luogo troppo piccolo può influenzarne le funzioni (per es. accumulo di calore nello strumento). Nel dubbio, eseguire un'analisi di accertamento del rischio.

L'utente si assume la responsabilità di eventuali danni.



Avvelenamento



Corrosione

- Sostanze che contengono componenti velenosi o corrosivi. Tali sostanze possono essere essiccate solamente sotto un aspiratore o una cappa di aspirazione. Non si deve superare il valore per la «concentrazione massima sul posto di lavoro».

Corrosione:

- Sostanze che emettono vapori aggressivi se sottoposte a riscaldamento (per es. acidi). Per tali sostanze si consiglia di lavorare con piccole quantità di campione in quanto i vapori si possono condensare sulle parti più fredde dell'alloggiamento ed avere un'azione corrosiva.

L'utente si assume la responsabilità di eventuali danni.

# Messa in funzione

L'analizzatore d'umidità consiste di un'unità di riscaldamento, un sistema di pesatura e un'unità di visualizzazione e comando. Oltre all'alimentazione elettrica tramite la tensione di rete, esso dispone di un'interfaccia per il collegamento di apparecchiature supplementari come computer, stampante esterna ecc.

## Condizioni di stoccaggio e di trasporto

Temperatura di stoccaggio permessa:  
0 ... +40 °C

Non esporre lo strumento a temperature estreme, umidità, urti e vibrazioni.

## Disimballaggio

- Dopo aver disimballato lo strumento, controllare subito se ci sono danni esterni visibili
- In caso di danni: vedere il capitolo «Cura e manutenzione», sezione «Controllo di sicurezza»

Conservare tutte le parti dell'imballaggio originale per evitare, in caso di rispeditura dello strumento, dei danni dovuti al trasporto. Prima della spedizione scollegare tutti i cavi per evitare danni inutili.

## Equipaggiamento fornito

Fanno parte dell'equipaggiamento i seguenti componenti:

- Analizzatore d'umidità
- Cavo di alimentazione
- Fermapiattello
- Anello di protezione contro le correnti d'aria (a tazza)
- Copertina di protezione per la tastiera
- 80 piattelli portacampione monouso in alluminio
- Pinzetta

## Consigli per l'installazione

Lo strumento è costruito in modo tale che in condizioni di utilizzo normali in laboratorio fornisce risultati affidabili. Lo strumento lavora in modo veloce ed esatto quando è stato scelto un luogo di installazione appropriato:

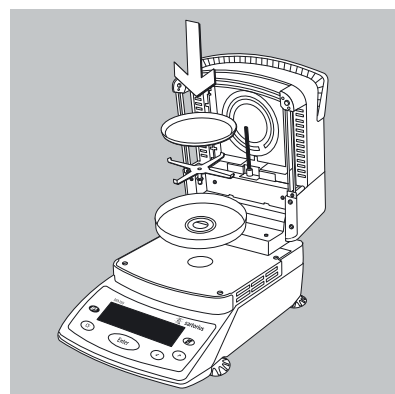
- mettere lo strumento su una superficie di lavoro stabile e piana e regolarlo con i 4 piedini di livellamento
- evitare l'irraggiamento di calore diretto attraverso raggi solari, riscaldamento o simili
- evitare forti variazioni di temperatura
- evitare correnti d'aria (provenienti da porte e finestre aperte)
- scegliere un ambiente possibilmente privo di polvere
- proteggere lo strumento da vapori chimici aggressivi
- evitare l'umidità estrema
- garantire spazio libero sufficiente attorno all'apparecchio per evitare l'accumulo di calore. Tenere ad una distanza di sicurezza materiali sensibili al calore che si trovano vicino all'apparecchio.

## Acclimatazione dell'apparecchio


Quando si porta una bilancia fredda in un ambiente sensibilmente più caldo, si può verificare la formazione di condensa (condensa sull'apparecchio di umidità atmosferica). Acclimatare la bilancia staccata dalla rete per ca. 2 ore a temperatura ambiente. Tenete l'apparecchio continuamente collegato alla rete elettrica. Grazie alla differenza di temperatura positiva permanente tra l'ambiente interno della bilancia e quello esterno, si può in pratica escludere l'effetto dell'umidità.

## Montaggio dell'apparecchio

- Montare le parti nel seguente ordine:
  - Copertina di protezione sulla tastiera
  - Anello di protezione contro le correnti d'aria
  - Collocare il fermapiattello e girarlo con attenzione a sinistra o a destra, premerlo leggermente finché si innesta
  - Piattello portacampione monouso



## Visione d'insieme dello strumento

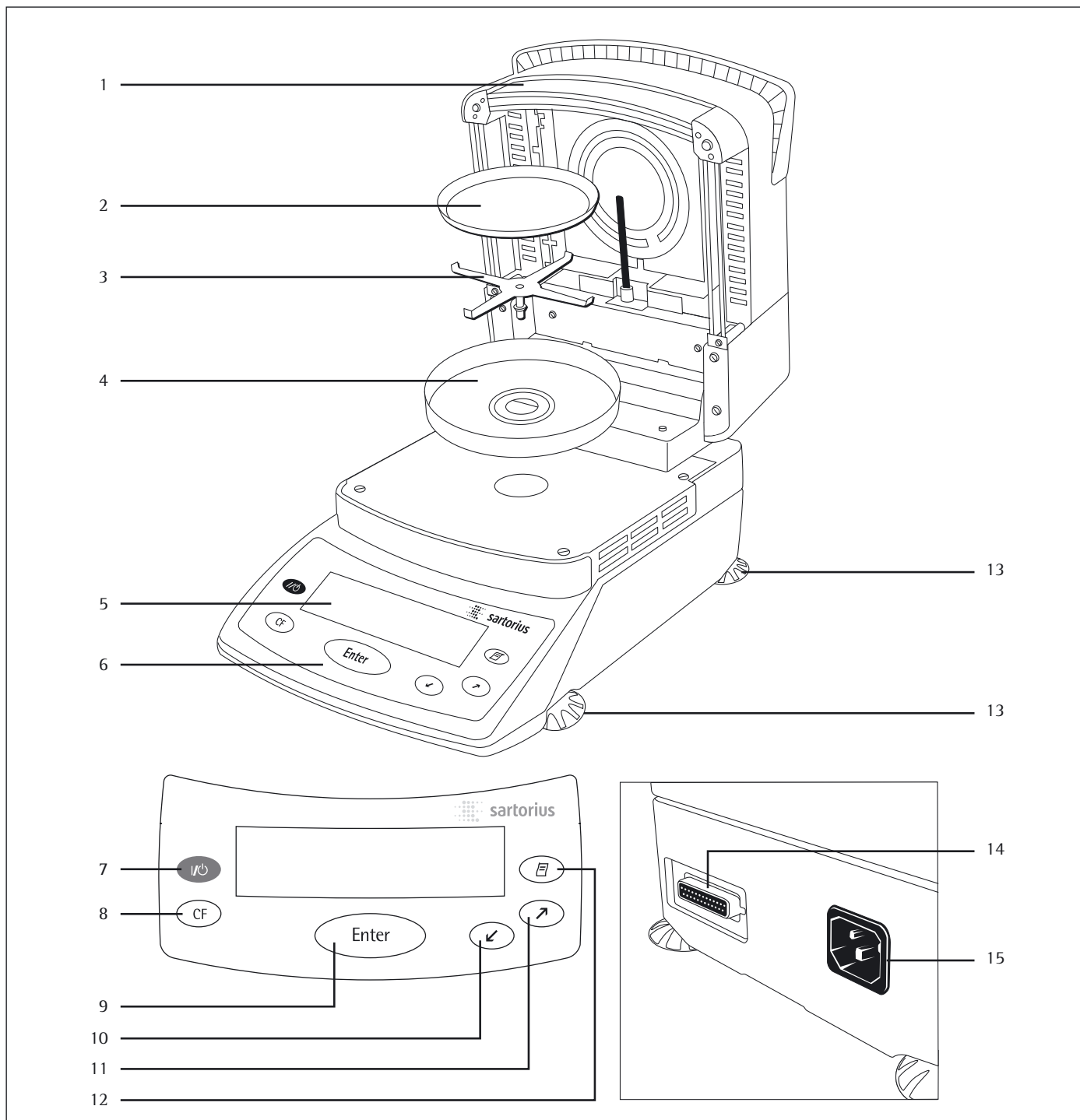


N.	Descrizione	Codice del pezzo di ricambio
1	Copertura ribaltabile con unità di riscaldamento	
2	Piattello portacampione monouso	6965542 (80 pezzi)
3	Fermapiattello	69MA0092
4	Anello di protezione contro le correnti d'aria	69MA0093
5	Display	
6	Tastiera	
7	Accensione/spengimento	
8	Tasto «CF» (clear function, cancellazione)	
9	Tasto «Enter» (conferma)	

N.	Descrizione	Codice del pezzo di ricambio
10	Tasto «verso il basso/indietro»	
11	Tasto «verso l'alto/avanti»	
12	Stampa	
13	Piedino regolabile	
14	Interfaccia dati	
15	Presse dell'alimentazione	

Non in figura:  
 Copertina di protezione per la tastiera 6960MA02  
 Pinzetta 69MA0072

## Collegamento alla rete

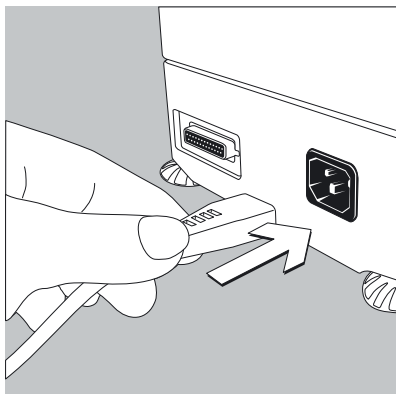

- Controllare il voltaggio e la forma della spina.

- Per motivi tecnici, l'unità di riscaldamento viene impostata in fabbrica sul voltaggio di 230 V oppure di 115 V. La tensione di rete relativa viene adattata al valore dato nella Vostra ordinazione. Il voltaggio viene riportato sulla targhetta di identificazione del modello (vedi parte posteriore dell'apparecchio), per es.:
  - 230 Volt: MA150–...230..
  - 115 Volt: MA150–..115..

- △ Se non corrispondono:  
l'apparecchio non deve essere assolutamente messo in funzione, rivolgersi al fornitore.

Utilizzare solo

- Cavo di alimentazione originale
- Cavo di alimentazione approvato da un tecnico specializzato
- Se la lunghezza del cavo di alimentazione in dotazione non è sufficiente:  
utilizzare solamente un cavo di prolunga con conduttore di protezione

- Alimentazione di rete dell'analizzatore d'umidità della classe di protezione 1:  
collegare la spina del cavo di rete a una presa installata secondo le disposizioni con attacco per il conduttore di protezione (PE)



### Misure di sicurezza

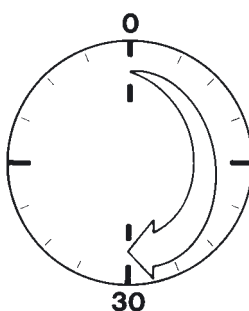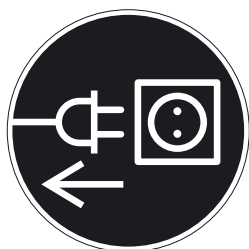Se l'alimentazione di tensione proviene da reti senza il conduttore di protezione, un tecnico specializzato deve realizzare una protezione equivalente conforme alle disposizioni per l'installazione vigenti.

L'azione protettiva non deve essere neutralizzata dall'uso di una prolunga priva di conduttore di protezione.


### Collegamento dei componenti elettronici (periferiche)

- Staccare lo strumento dalla rete prima di attaccare/staccare dall'interfaccia una periferica (stampante, PC)



### Tempo di preriscaldamento

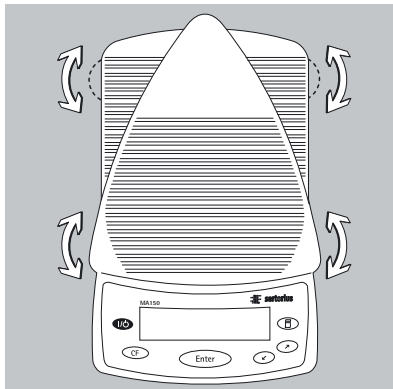
Per dare risultati di pesata precisi, l'analizzatore d'umidità ha bisogno di un tempo di preriscaldamento di almeno 30 minuti dopo averlo collegato alla rete per la prima volta. Trascorsi i 30 minuti l'apparecchio ha raggiunto la temperatura di esercizio richiesta.



### **Livellamento dell'apparecchio**


Scopo:

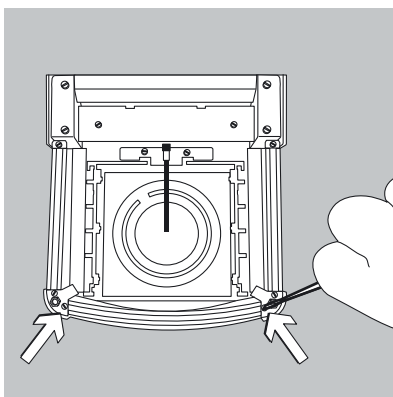- Livellamento delle disuguaglianze del luogo d'installazione dello strumento
- Posizione piana, necessaria soprattutto per sostanze liquide che devono distribuirsi sul piattello portacampione monouso in modo uniforme  
Livellare l'analizzatore d'umidità di nuovo se si cambia luogo d'installazione.
- Avvitare o svitare i piedini anteriori e posteriori




### **Montaggio dei pannelli di alluminio (opzionale)**

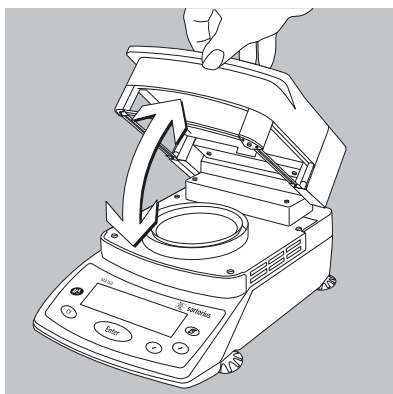- △ Togliere le piastre di vetro quando si sono raffreddate
- △ Non toccare i pannelli di alluminio con dita unte o sporche di grasso
- △ Non graffiare i pannelli di alluminio e non pulirli con detergenti aggressivi
- Svitare i 2 supporti con la chiave fissa fornita
- Togliere le piastre di vetro
- Inserire i pannelli di alluminio nella guida
- Rifissare i pannelli di alluminio con i supporti



### **Accensione dell'apparecchio, apertura e chiusura della camera per campioni**

- Accensione dell'apparecchio: premere il tasto 
- Apertura e chiusura manuale della camera per campioni: lasciare la copertura ribaltabile solo quando è completamente chiusa o aperta (all'arresto)

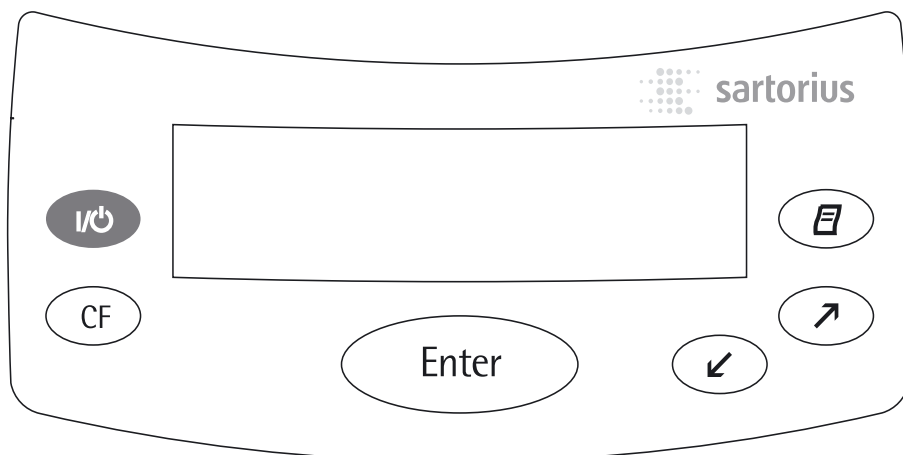
### **Impostazione della lingua**

- vedi il capitolo «Impostazioni», sezione «Impostazione della lingua»






# Sistema di funzionamento




Il funzionamento dell'analizzatore d'umidità si basa su un concetto unitario descritto nelle pagine seguenti.





## Tasti

### Significato


-  **Accensione/spegnimento**  
Accende o spegne lo strumento.  
Dopo lo spegnimento, l'analizzatore d'umidità rimane nel funzionamento di standby
-  **Clear Function**  
Annulla funzioni applicative e operazioni di calibrazione e regolazione in corso  
Nel menù: uscire dal livello di menù
-  **ENTER**  
Nel modo operativo: avviare le funzioni selezionate (per es. tara, avvio, annullamento)  
Nel menù: registrazione dell'impostazione/immissione selezionata

-  **Verso il basso/indietro**  
Nel menù: selezione della voce di menù successiva nello stesso livello  
Per l'immissione alfanumerica: visualizzazione della cifra o carattere inferiore (vedi a destra)
-  **Verso l'alto/avanti**  
Nel menù: selezione della voce di menù precedente nello stesso livello  
Per l'immissione alfanumerica: visualizzazione della cifra o carattere superiore (vedi a destra)
-  **Stampa**  
I valori visualizzati e/o i protocolli vengono emessi tramite l'interfaccia dati su una stampante esterna

Immissione di lettere, caratteri speciali e cifre:  
quando il cursore lampeggia su un carattere (lettera, carattere speciale, cifra), questo può essere modificato usando i tasti  e  nel seguente ordine:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . - + / \* =  
< > ( ) : ? ! \$ % # @ Z Y X W  
V U T S R Q P O N M L K J I H G  
F E D C B A \_ (carattere vuoto)

Per registrare l'immissione dei caratteri:  
premere il tasto 

Per registrare il valore: premere il tasto  due volte o per più di 2 secondi

Per cancellare l'immissione del carattere:  
immettere un carattere vuoto

## Funzionamento

Ci sono due modi diversi di visualizzazione:

- la visualizzazione per la funzione di analisi e test
- la visualizzazione per il funzionamento del menù (per es. Setup, programma)

## Funzione di analisi e test

Questo display è diviso in 9 campi.

Informazioni/Programma essiccazione/Funzione test			
Barra grafica		Simboli grafici	
Valore di analisi/Risultato	Unità		
Riga di funzione			
Segni aritmetici Simbolo di Busv		Simbolo per la stampa	


## Esempio di funzionamento per l'analisi:

Riga di Informazioni/Programma di essiccazione:

Qui vengono visualizzate le seguenti informazioni:

- numero del programma di essiccazione selezionato, per es. **P1**
- temperatura di essiccazione impostata, per es. **105°C**
- criterio impostato per la fine dell'analisi, per es. **Autom.**
- temperatura attuale
- tempo di essiccazione attuale

Simbolo di Busy:

Appare il simbolo  che rimane visualizzato durante lo svolgimento di elaborazioni interne attivate premendo un tasto.


Segni aritmetici:

Qui appaiono i segni aritmetici (**+** o **–**) per il valore di pesata (o per il valore calcolato, per es. il valore percentuale).

Barra grafica:

La barra grafica viene visualizzata durante la pesatura se nel programma di pesata è stato selezionato **On**.

Possono apparire i seguenti simboli:

	Barra grafica con sottodivisioni
<b>–</b>	Valore nominale –20%
<b>=</b>	Valore nominale
<b>+</b>	Valore nominale +20%

Valore di analisi:

Qui vengono visualizzati il valore di pesata o il valore calcolato.

Unità:

Quando la bilancia ha raggiunto la stabilità, vengono visualizzate l'unità di peso o l'unità per un valore calcolato.

Simboli grafici:

In base allo stato operativo vengono visualizzati diversi simboli grafici, per es.:




Essiccazione in corso

Simbolo per la stampa:

Durante la stampa dei risultati di analisi e dei protocolli si visualizza il simbolo:

 Stampa

Riga di funzione:

In questa riga vengono rappresentate delle funzioni che una volta selezionate (su sfondo nero) permettono l'accesso a Setup e ai programmi applicativi, oppure che possono essere avviate con il tasto  (per es. taratura, avvio, cal. per calibrazione ecc.).



In questa riga viene emesso anche il messaggio di errore. In questo caso l'intera riga viene sovrascritta.

## Funzionamento del menù

Questo display è ordinato in 2 campi.

Riga di stato
Finestra di entrata e uscita

### Riga di stato:

Nella riga di stato si trova la funzione descritta nella pagina visualizzata. Nel Setup si trova il «percorso» per le informazioni visualizzate in questa riga.

### Esempio Setup, Lingua:

SETUP	LINGUA

### Finestra di entrata e uscita:

Qui vengono indicate le informazioni di dettaglio (per es. per il programma di essiccazione selezionato) oppure le liste, dalle quali si possono scegliere i parametri. Le informazioni selezionate appaiono scritte in bianco su sfondo nero. Allo stesso modo è possibile l'immissione di caratteri nei campi attivati (cifre, simboli speciali, lettere).

### Esempio Setup, Lingua:

Deutsch
English
U.S.-Mode
Français







I seguenti simboli possono apparire nella finestra di entrata e uscita:

- con questo simbolo viene selezionata l'impostazione memorizzata




## Impostazione dei parametri

I parametri sono riassunti nei menù. I menù hanno più livelli.

### Esempio Setup:



- Selezione dei parametri: selezionare la voce **SETUP** nella riga di funzione usando i tasti  e  e confermare con il tasto 
- Spostarsi all'interno di un livello di menù: premere i tasti  e 
- Selezione della voce di menù (sottomenù): premere il tasto 

## Impostazione dei parametri:





- Premere più volte i tasti  e  fino alla selezione dell'impostazione dei parametri (indicazione su sfondo scuro)
- Conferma dei parametri: premere il tasto 

## Modifica del valore di un parametro:

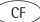
### Parametro di selezione:

- Premere più volte i tasti  e  fino alla selezione dell'impostazione dei parametri (indicazione su sfondo scuro)


### Immissione alfanumerica:

- Modifica del carattere lampeggiante: premere più volte i tasti  e  finché si visualizza il carattere desiderato, quindi confermare con il tasto 
- Conferma del parametro: premere il tasto 

### Indietro:

- premere il tasto 

### Per uscire da Setup:

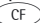- premere il tasto 

## Uscita dati

Per l'emissione dei dati è disponibile un'interfaccia dati per il collegamento di:

- Stampante
- Indicatore di stato
- PLC (Programmable Logic Controller)
- Computer

### Stampante

Il modo di emissione dei dati su una stampante esterna può essere configurato in conformità alle richieste delle norme ISO/GLP.

ISO: International Organization for Standardization (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione)

GLP: Good Laboratory Practice (Buona Pratica di Laboratorio)

Una descrizione dettagliata si trova nel capitolo «Modo di analisi», sezione «Uscita dati».

### Interfaccia dati

Al posto di una stampante esterna, all'interfaccia dati è possibile collegare un indicatore di stato, un PLC o un computer avente un'interfaccia di comunicazione.

Una descrizione dettagliata si trova nel capitolo «Modo di analisi», sezione «Uscita dati».

### Messaggi di errore

I tasti premuti che non hanno effetto o che non sono permessi, sono segnalati nel modo seguente:

- con un doppio segnale acustico se il tasto non ha funzione
- con messaggi di errore corrispondenti per immissioni non permesse
- con numeri di errore o messaggi di errore per un utilizzo sbagliato

Il trattamento dell'errore è uguale in tutti i modi operativi. Una descrizione dettagliata dei messaggi d'errore si trova nel capitolo «Messaggi di errore».

### Salvataggio dei dati

#### Memorizzazione dell'impostazione dei parametri

Le impostazioni dei parametri del Setup e dei programmi di essiccazione rimangono memorizzate anche dopo lo spegnimento dell'analizzatore d'umidità. Inoltre l'impostazione di fabbrica può essere ripristinata.

#### Salvataggio delle impostazioni

Con una password si può bloccare l'accesso:

- ai programmi di essiccazione configurati dall'operatore
- all'impostazione dei parametri dello strumento
- alle funzioni isoTEST

Finché non è stata introdotta una password, si ha libero accesso a **SETUP**: parametri dello strumento e alla configurazione dei programmi di essiccazione.

Nel caso in cui la password introdotta sia stata dimenticata, si può utilizzare la password generale (vedi allegato).

# Impostazioni

## Scopo

L'apparecchio può essere adattato alle richieste dell'operatore modificando le impostazioni nel Setup. A tale scopo si possono introdurre i dati dell'operatore e impostare nel menù i diversi parametri.

Il Setup è suddiviso in:




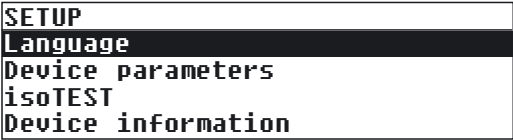

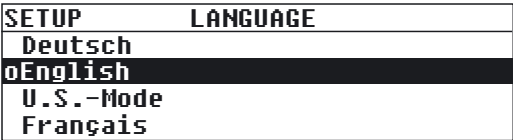



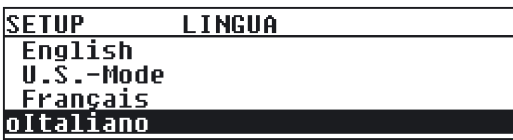



- Lingua
- Parametri dello strumento
- isoTEST
- Informazioni dei dati dello strumento

## Impostazione della lingua

La visualizzazione delle informazioni è possibile in 5 lingue:

- Tedesco
- Inglese (impostazione di fabbrica)
- Modo U.S.  
(Inglese con data/ora U.S.)
- Francese
- Italiano
- Spagnolo

## Esempio: Selezionare la lingua «Italiano»

Passo	Premere il tasto (o azione)	Lettura/Uscita dati
1. Selezionare <b>SETUP</b> nella riga di funzione e confermare	 oppure  	
2. Confermare la lingua		
3. Selezionare la lingua «Italiano»		
4. Confermare la lingua		
5. Uscire da Setup «Lingua»	 	

## Impostazione dei parametri dello strumento (STRUMENTO)

### Scopo

La configurazione dello strumento, cioè l'adattamento alle esigenze dell'operatore mediante la selezione di parametri dati nel menù. L'accesso al menù può essere protetto con una password.

### Caratteristiche

I parametri dello strumento sono riuniti nei seguenti gruppi (1° livello di menù):

- Password
- ID utente
- Interfaccia
- Protocollo di essiccazione
- Orologio
- Contrasto del lettore/display
- Segnale acustico
- Funzione commutatore esterno
- Impostazione di fabbrica

I seguenti parametri possono essere visualizzati, introdotti e modificati:

#### Password:

- Password per SETUP: parametri dello strumento, programmi di essiccazione e funzioni isoTEST

#### ID utente:

- Riga di testo con massimo 20 caratteri per l'intestazione di protocollo GLP, destinata all'identificazione dell'utente

#### Interfaccia:

- Modo di funzionamento SBI  
Facile documentazione dei risultati per computer o stampante esterna, impostazioni di fabbrica per la stampante YDP03-OCE  
Parametri impostabili: Baudrate, numero dei bit di informazione, parità, bit di stop, handshake
- Modo di funzionamento xBPI  
Interfaccia impostata secondo le funzioni con trasmissione trasparente dei dati  
Indirizzo in rete: entrata da 0 fino a 31; impostazione di fabbrica 0

#### Protocollo di essiccazione:

- Per il protocollo di essiccazione si possono selezionare da una a tre modalità di rappresentazione:
  - Solo i risultati
  - Con i parametri GLP/di essiccazione
  - In base alla configurazione (è possibile scegliere i parametri da emettere: intestazione GLP, identificazione del programma, riga di intestazione 1, riga di intestazione 2, parametri di riscaldamento, criterio di accensione, criterio di spegnimento, peso iniziale, risultato provvisorio, peso finale, risultato finale e campo per il nome)

#### Orologio:

Impostazione ora /hh.mm.ss.; ore 0-24) e data (gg.mm.aa; nel modo U.S.: mm.gg.aa)

#### Contrasto del display:

- Impostazione del contrasto/angolo visuale del lettore (selezione da 0 fino a 4; impostazione di fabbrica 2)

#### Segnale acustico:

- Accensione e spegnimento

#### Funzione commutatore esterno:

- Impostare il commutatore per attivare una delle seguenti funzioni: Stampa, Enter, CF o Lettore di codici a barre/ Tastiera aggiuntiva




#### Impostazione di fabbrica

- Parametri: le impostazioni sono elencate nella lista a partire da pagina 17 e sono contrassegnate con il simbolo «**o**».

## Preparazione

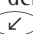

Visualizzazione dei parametri dello strumento esistenti

- Selezionare l'impostazione:

Selezionare **SETUP** nella riga di funzione con i tasti  o  e confermare con il tasto 

- > Appare **SETUP**:

SETUP
Lingua
Parametri dello strumento
isoTEST
Informazioni dati strumento





- Selezionare la voce Parametri dello strumento: premere il tasto  e confermare con il tasto 

Finché non è stata introdotta nessuna password, l'accesso a **SETUP**: Parametri dello strumento, è libero

Se è già stata introdotta una password:

- > appare la richiesta di introduzione della password

SETUP	PASSWORD
Immissione password:	

- Se l'accesso è stato protetto con una password: immettere ogni carattere della password con i tasti  oppure  e confermare con il tasto 
- Confermare la password e visualizzare Parametri dello strumento: premere il tasto 

- > I parametri dello strumento appaiono sul display:

SETUP	STRUMENTO
Password	
Interfaccia	
Contrasto lettore	
Segnale acustico	

### Entrata/modifica della password

- La password di 8 caratteri max. è stata introdotta per accedere alle seguenti funzioni:
  - SETUP: Parametri dello strumento
  - Programmi di essiccazione
  - SETUP: isoTEST
- Visualizzazione dei parametri dello strumento (vedi sezione precedente: Preparazione, Visualizzazione dei parametri dello strumento esistenti)
- Riportare qui la password introdotta:  
  
Password =  
  
Se una password è stata introdotta e poi è stata dimenticata:
- Introdurre la password generale (vedi allegato)
- Confermare la password e visualizzare Parametri dello strumento: premere il tasto **Enter**
- > La voce Parametri dello strumento appare sul display (vedi sopra)
- Selezionare in Parametri dello strumento la voce «Password» e confermare: premere il tasto **Enter**
- > Password: e nel caso appare la password esistente:

SETUP	STRUMENTO	PASSWORD
Password:		12345678

- Immettere una nuova password: immettere le cifre e le lettere (8 caratteri max.) con i tasti **↗** oppure **↘** e confermare con il tasto **Enter**  
La password «vuoto» significa: nessuna protezione con password
- Confermare l'immissione: premere il tasto **Enter**
- Uscire dall'impostazione: premere 2 volte il tasto **CF**

### Ulteriori funzioni

Stampa dell'impostazione dei parametri:

- Se i parametri dello strumento sono visualizzati: premere il tasto **↗**
  - > Stampa (esempio)  
Le righe di testo che superano i 20 caratteri vengono tagliate
- ```

-----
114.07.2006      12:40
MOD.      MA150Q-000230V
N.SER.      18701636
N.VER.      01-50-01
ID
-----
SETUP
STRUMENTO
-----
ID UTENTE
ID UTENTE:

INTERFACCIA
SBI
BAUDRATE      1200 BAUD
NUMERO DEI BIT DI
INFORMAZIONE      7 BIT
PARITÀ
ODD
NUMERO DEI BIT DI
STOP
1 BIT DI STOP
MODO HANDSHAKE
HARDWARE 1 CARATTERE
PROTOCOLLO DI
ESSICCAZIONE
CON PARAMETRI GLP/DI
ESSICCAZIONE
OROLOGIO
SEGNALE ACUSTICO
ON
CONTRASTO DEL LETTORE
/DISPLAY
2
FUNZIONE COMMUTATORE
ESTERNO
TASTO STAMPA
-----
  
```

Ripristino dei parametri dello strumento sull'impostazione di fabbrica:

- Selezionare l'impostazione: selezionare **SETUP** nella riga di funzione con i tasti **↗** oppure **↘** e confermare con il tasto **Enter**
  - > Appare **SETUP**:
- | SETUP                       |
|-----------------------------|
| Lingua                      |
| Parametri dello strumento   |
| isoTEST                     |
| Informazioni dati strumento |
- Selezionare la voce Parametri dello strumento: premere il tasto **↘** e confermare con il tasto **Enter**
  - Se l'accesso è stato protetto con una password: immettere la password come descritto sopra
  - Confermare la password e visualizzare Parametri dello strumento: premere il tasto **Enter**
  - > I parametri dello strumento appaiono sul display:
  - Selezionare **Impostazione di fabbrica**: premere 4 volte il tasto **↘**
- | SETUP                    | STRUMENTO |
|--------------------------|-----------|
| Interfaccia              |           |
| Contrasto lettore        |           |
| Segnale acustico         |           |
| Impostazione di fabbrica |           |
- Confermare **Impostazione di fabbrica**: premere il tasto **Enter**
  - Per annullare l'operazione: premere il tasto **CF**
  - Selezionare Sì e confermare. Premere il tasto **↘** e premere il tasto **Enter**
  - Uscire dalle impostazioni: premere 3 volte il tasto **CF**

**Esempio:**

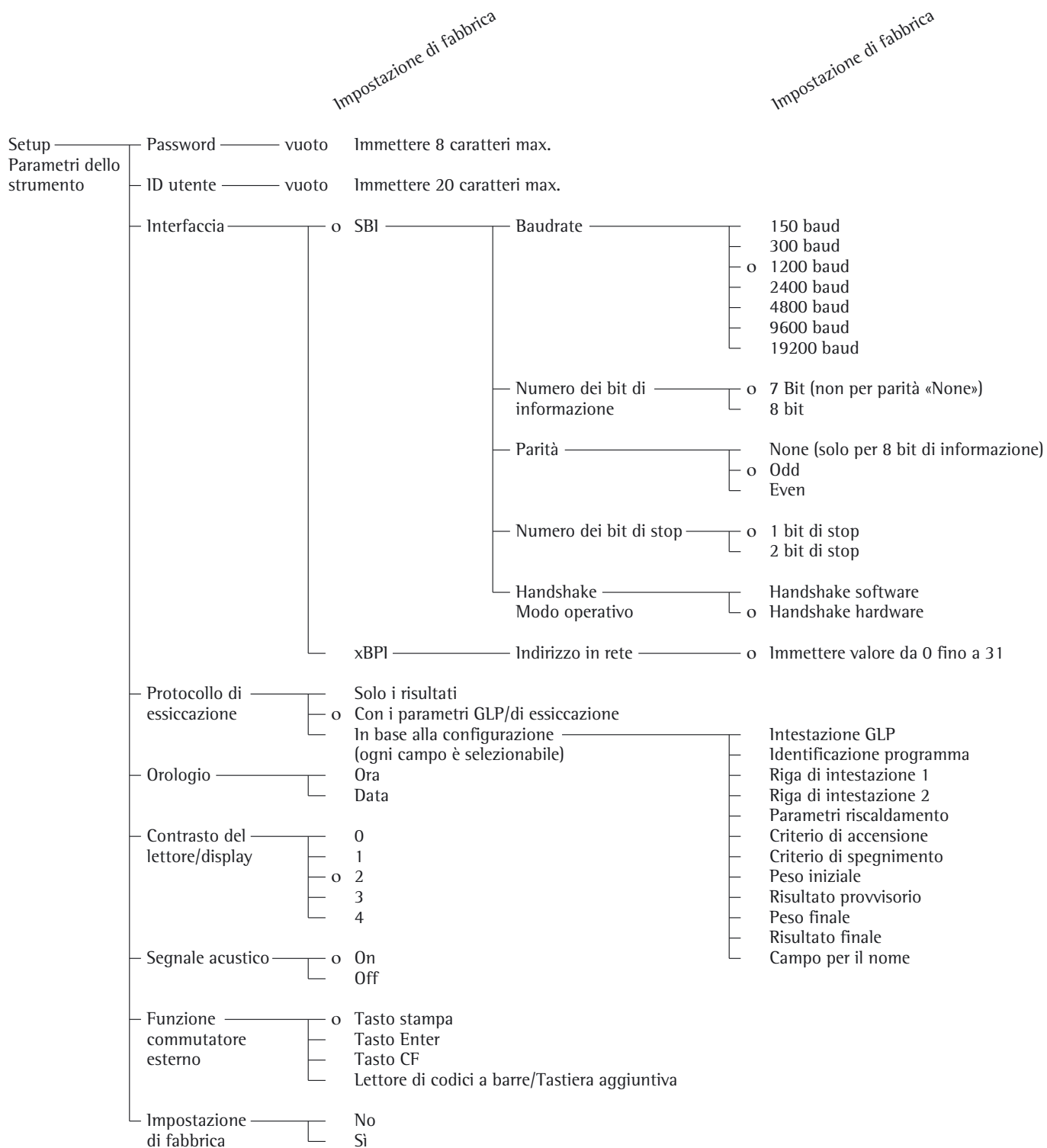
Selezione del contrasto del display «3»

| Passo                                              | Premere il tasto (o azione) | Letture/Uscita dati |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. Selezionare <b>SETUP</b> nella riga di funzione | oppure                      |                     |
| 2. Richiamare <b>SETUP</b>                         |                             |                     |
| 3. Selezionare<br><b>Parametri dello strumento</b> |                             |                     |
| 4. Confermare<br><b>Parametri dello strumento</b>  |                             |                     |
| 5. Selezionare <b>Contrasto lettore</b>            | 5 volte                     |                     |
| 6. Confermare <b>Contrasto lettore</b>             |                             |                     |
| 7. Selezionare il livello di contrasto <b>3</b>    | (più volte)  oppure         |                     |
| 8. Memorizzare il livello di contrasto             |                             |                     |
| 9. Uscire da Setup: Parametri dello strumento      | 3 volte                     |                     |



## Parametri dello strumento (prospetto)

- o Impostazione di fabbrica
- √ Impostazione dell'operatore






## Informazioni specifiche dello strumento

### Scopo



Visualizzazione delle informazioni specifiche dello strumento

### Visualizza informazioni specifiche dello strumento

- Selezionare l'impostazione: selezionare **SETUP** nella riga di funzione con i tasti  oppure  e confermare con il tasto 


> Appare **SETUP**:


|                             |
|-----------------------------|
| <b>SETUP</b>                |
| <b>Lingua</b>               |
| Parametri dello strumento   |
| isoTEST                     |
| Informazioni dati strumento |

- Selezionare **Informazioni dati strumento**: premere 3 volte il tasto  e confermare con il tasto 

> I parametri dello strumento appaiono sul display



| SETUP         | INFO     |
|---------------|----------|
| N. versione:  | 01-50-01 |
| N. ver. bil.: | 00-25-04 |
| Modello:      | MA150Q   |
| N. serie:     | 18701636 |

- Uscire dalle impostazioni: premere 2 volte il tasto 

- Stampa delle informazioni: premere il tasto 

> Stampa (esempio)

```
-----
14.07.2006          12:40
MOD.      MA150Q-000230V
N.SER.     18701636
N.VER.     01-50-01
(Ver. del programma operativo)
ID
-----
SETUP
          INFO
-----
N.VER.:          01-50-01
(Ver. del programma operativo)
N. VER. BIL:     00-25-04
(Vers. progr. del sistema di pesatura)
MODELLO:        MA150Q-000230V
N. SERIE:       18701636
-----
```

- Ritorno a **SETUP**: premere il tasto 
- Uscire dalle impostazioni: premere 2 volte il tasto 

> Si ritorna allo stato precedente

# Nozioni generali

## Scopo

L'analizzatore d'umidità MA viene impiegato per l'analisi veloce e affidabile dell'umidità di materiali liquidi, pastosi e solidi, basandosi sul metodo della termogravimetria.

## Materiale

L'umidità di un campione non è solo relativa al contenuto d'acqua. Per umidità del materiale s'intendono tutte le componenti volatili che vengono liberate riscaldando il campione e che portano a una perdita di peso dello stesso. Tra queste sostanze volatili troviamo:

- Acqua
- Grassi
- Oli
- Alcoli
- Solventi organici
- Aromi
- Componenti volatili, prodotti di decomposizione (quando si surriscalda un campione)

Esistono diversi metodi per l'analisi del grado di umidità di un materiale. Questi metodi possono essere divisi in due categorie.

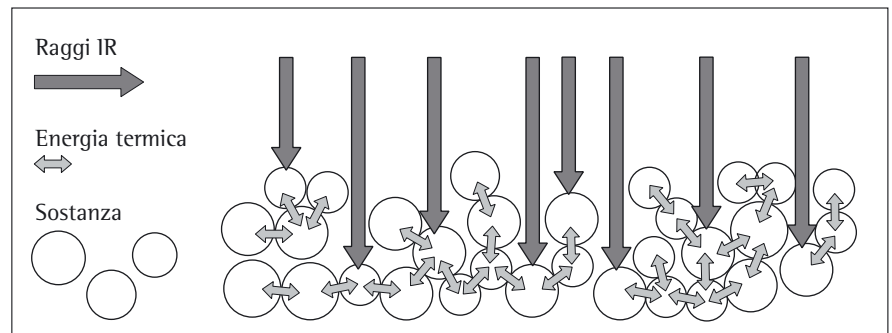
Utilizzando i metodi assoluti, il grado di umidità di un materiale viene analizzato direttamente (per es. come perdita di peso data dall'essiccazione). A questa categoria appartengono l'essiccazione a forno, l'essiccazione a infrarossi e l'essiccazione a microonde. Tutti i tre metodi lavorano in modo termogravimetrico.

Utilizzando i metodi derivati viene fatta un'analisi indiretta. Viene misurata una caratteristica fisica che è in relazione all'umidità del materiale (per es. l'assorbimento della radiazione elettromagnetica). A questa categoria appartengono la titolazione Karl-Fischer, la spettroscopia all'infrarosso e la spettroscopia a microonde e altri.


La termogravimetria è un metodo che analizza la perdita della massa data dal riscaldamento di una sostanza. La sostanza viene pesata prima e dopo il riscaldamento e poi viene calcolata la differenza tra il peso iniziale e quello finale.

In un forno tradizionale di essiccazione, l'aria calda in circolazione scalda il campione dall'esterno verso l'interno contro il flusso di umidità che evaporando raffredda la superficie del campione.

I raggi a infrarosso (raggi IR) invece penetrano in un campione senza esserne impediti. Quando raggiungono il suo interno vengono convertiti in energia termica che stimola l'essiccazione.



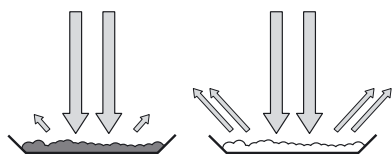Una piccola parte dei raggi IR viene riflessa dalla sostanza o viene lasciata passare. La quantità dei raggi IR riflessi dipende prevalentemente dalla sostanza, se questa è chiara o scura.




Sostanza scura  
Bassa riflessione

Sostanza chiara  
Forte riflessione

La profondità di penetrazione della radiazione IR dipende dalla penetrabilità della sostanza. Se la penetrabilità è bassa, la radiazione IR penetra solo negli strati superiori. Fattore determinante per l'ulteriore trasporto del calore negli strati più profondi è la conduttività termica della sostanza. Tanto maggiore è la conduttività termica quanto più veloce e più omogeneo sarà il riscaldamento della sostanza.

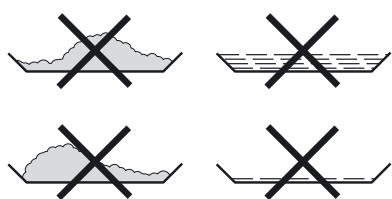Per questo motivo la sostanza deve essere distribuita sul piattello portacampione in uno strato sottile e uniforme. La quantità ottimale di sostanza misura un'altezza tra i 2 e i 5 mm e un peso tra i 5 e i 15 g. Altrimenti può accadere che l'essiccazione non avvenga in modo completo, che il tempo di analisi si allunghi, che si presentino incrostazioni, bruciature e che i risultati di analisi non siano riproducibili.



Distribuzione sbagliata della sostanza

Durante la preparazione delle sostanze per l'analisi non si devono impiegare metodi che generano calore, in quanto il calore generato può provocare una perdita di umidità prima dell'inizio dell'analisi.

Insieme alle prime analisi di una sostanza si dovrebbe pure verificare come la radiazione IR viene assorbita e convertita in energia termica. La stampa dei valori provvisori del procedimento di essiccazione dà a riguardo informazioni tempestive.

L'impostazione della temperatura durante l'essiccazione all'infrarosso si trova, come mostra l'esperienza, per lo più al di sotto dell'usuale impostazione della temperatura per l'essiccazione a forno.

In molti casi lo spegnimento completamente automatico potrà già soddisfare le richieste desiderate. Se il risultato è superiore o inferiore alle aspettative, allora si dovrebbe per prima cosa variare l'impostazione della temperatura prima di scegliere un altro parametro di spegnimento.

In caso di sostanze che emettono l'umidità solo in modo molto lento oppure se l'analizzatore d'umidità è ancora in uno stato freddo, può accadere che lo spegnimento completamente automatico termini l'analisi anticipatamente in quanto non viene riconosciuto nessun procedimento di essiccazione analizzabile. In questo caso, l'analizzatore d'umidità dovrebbe essere preriscaldato per due fino a tre minuti oppure si dovrebbe scegliere un altro criterio di spegnimento.

Il manuale di istruzioni per l'uso dell'analizzatore d'umidità Sartorius contiene numerose informazioni utili per il suo utilizzo ottimale.

### **Preparazione**

Prima di procedere all'essiccazione di un campione si devono effettuare le seguenti preparazioni:

- Configurazione in base al sistema di analisi esistente (se necessario)
- Preparazione del campione
- Impostazione dei parametri per il programma di essiccazione

### **Configurazione in base al sistema di analisi esistente**

Succede spesso che l'analizzatore d'umidità venga impiegato al posto di altri metodi di essiccazione (per es. il metodo di essiccazione a forno), dato che un utilizzo semplificato accelera i tempi di analisi.

In questo caso il metodo di essiccazione con l'analizzatore d'umidità deve essere fatto corrispondere al metodo standard utilizzato precedentemente in modo che si ottengano risultati di analisi comparabili.

- Eseguire analisi parallele: prendere un nuovo campione e dividerlo in due parti
- Determinare l'umidità della 1° parte con il metodo standard
- Determinare l'umidità della 2° parte con l'analizzatore d'umidità. Utilizzare le seguenti impostazioni:
  - spegnimento completamente automatico per la fine dell'analisi
  - impostazioni della temperatura più basse rispetto a quelle del metodo dell'essiccazione a forno
  - impostazione della temperatura per le sostanze organiche: 80–100°C
  - impostazione della temperatura per le sostanze inorganiche: 140–160°C
- Se il risultato della 2° parte non corrisponde a quello della 1° parte:
  - prima ripetere l'analisi con una diversa impostazione della temperatura
  - solo successivamente impiegare il semiautomatico come criterio di spegnimento (per es. con valore di perdita modificato ogni 24 s)
- In caso, variare il criterio di spegnimento:
  - accelerare lo spegnimento: impostare il criterio su 2 mg / 24 s oppure 1 mg / 24 s
  - rallentare lo spegnimento: impostare il criterio su 10 mg / 24 s oppure 20 mg / 24 s

### **Preparazione del campione**

#### Selezione del campione

- Scegliere una parte rappresentativa della quantità totale come campione
  - per il controllo della qualità scegliere un numero rappresentativo di campioni singoli
  - per il controllo della produzione sono sufficienti dei campionamenti che mostrano l'evoluzione
- Eventualmente assicurarsi dell'omogeneità del campione in questo modo:
  - miscelare o mescolare
  - prelievo di campioni in più posti oppure
  - prelievo di campioni in determinati intervalli di tempo
- Per l'analisi si deve preparare sempre solo un campione e nel modo più veloce possibile al fine di evitare uno scambio di umidità tra il campione e l'ambiente.
- Se si devono prendere contemporaneamente più campioni, questi devono essere conservati in contenitori ermetici per evitare alterazioni del campione durante lo stoccaggio:
  - Campioni caldi o leggermente volatili perdono velocemente la loro umidità.
  - Per i campioni nei contenitori è possibile il formarsi della condensa sulle pareti.
  - Per i campioni in grandi contenitori l'umidità si sparge nell'aria.
- Eventualmente mescolare di nuovo la condensa con il campione

#### Preparazione del campione

- Evitare ogni adduzione di calore durante la macinazione del campione: il calore porta a una perdita di umidità
  - Macinare il campione con
    - il mortaio
    - il tritatore (vedi sotto)
- per i campioni liquidi con una percentuale di sostanze solide utilizzare:
- una bacchetta di vetro
  - un cucchiaino oppure
  - un agitatore magnetico.
- Per la macinazione di un campione utilizzare un apparecchio adatto.

#### Utilizzo di piattelli portacampione monouso

- Utilizzare solamente piattelli portacampione monouso Sartorius (diametro interno = 92 mm). I risultati dell'analisi non sono più riproducibili con i piattelli portacampione riutilizzati in quanto:
  - dopo la pulizia dei residui di campione potrebbero trovarsi ancora sul piattello
  - residui di detergente per la pulizia potrebbero evaporare durante l'analisi successiva
  - graffi e rigature durante la pulizia agevolano il formarsi di punti deboli soggetti all'azione dell'aria calda ascensionale durante l'operazione di essiccazione (aumento degli effetti delle correnti ascensionali)

#### Distribuzione del campione sul piattello portacampione

- Distribuire il campione sul piattello in modo uniforme e con poco spessore (altezza: 2 fino a 5 mm, quantità: 5 fino a 15 g), altrimenti:
  - avviene una distribuzione non omogenea del calore se la distribuzione del campione non è uniforme
  - il campione non viene essiccato completamente
  - il tempo di analisi si allunga inutilmente
  - possibilità di bruciature o incrostazioni se ci sono cumuli di campione
  - le incrostazioni impediscono la perdita di umidità o ne viene persa solo una minima parte durante l'operazione di essiccazione
  - rimangono quantità variabili e non misurate di umidità residua



- Mettere i campioni liquidi, pastosi o grassi su filtri in fibra di vetro (codice n°. 6906940); si hanno i seguenti vantaggi:

- distribuzione uniforme grazie all'attività capillare
- non si ha il fenomeno dell'imperlarsi o il formarsi di gocce
- evaporazione più veloce dell'umidità grazie a una maggiore superficie
- maggiore comodità rispetto al metodo «Seesand»

Per i campioni contenenti una percentuale di zucchero, durante l'essiccazione si può formare un'incrostazione che sigilla la superficie. Utilizzando un filtro in fibra di vetro, l'umidità può evaporare comunque uscendo dal basso attraverso il filtro. In molti casi si può evitare/limitare il formarsi di una pellicola o incrostazione sulla superficie ponendo un filtro in fibra di vetro sul campione.

- Coprire i campioni solidi, sensibili al calore con un filtro in fibra di vetro (codice n° 6906940); si hanno i seguenti vantaggi:
  - riscaldamento delicato dato dalla protezione della superficie del campione
  - possibile impostazione della temperatura a un livello più alto
  - maggiore uniformità della superficie del campione
  - evaporazione veloce dell'umidità
  - buona riproducibilità per i campioni grassi

#### Come evitare il formarsi di incrostazioni sul campione

Per evitare il formarsi di incrostazioni sui campioni durante l'analisi, si può aggiungere sul campione del «solvente». Il solvente aggiunto non viene preso in considerazione nel risultato finale dell'analisi.

- Entro 2 secondi dopo la chiusura della camera per campioni e dopo il segnale acustico riaprire la camera per campioni
- Mettere il solvente sul campione
- Chiudere la camera per campioni e avviare l'analisi come di consueto

# Modo di analisi

## Impostazione dei parametri di essiccazione

### Scopo

Adattare lo strumento per l'analisi dell'umidità alle caratteristiche particolari dei prodotti.

Per ogni programma si possono introdurre singoli parametri.

### Parametri di essiccazione (prospetto)

- o Impostazione di fabbrica
- ✓ Impostazione dell'operatore

| Impostazione di fabbrica             |                                                                                                                                        | Impostazione di fabbrica                                                  |                                          | Impostazione di fabbrica                                                          |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Memoria dei programmi<br>(PROGRAMMA) | o P1<br>...<br>P20                                                                                                                     |                                                                           |                                          |                                                                                   |  |
|                                      | Nome del programma – Vuoto (16 caratteri max.)                                                                                         |                                                                           |                                          |                                                                                   |  |
| Programma di riscaldamento           | o Essiccazione standard                                                                                                                | Temperatura                                                               | 105°C                                    | 40 ... 220°C fino a MA150Q, di solito 40 ... 180°C                                |  |
|                                      | Essiccazione delicata                                                                                                                  | Temperatura                                                               | 105°C                                    | 40 ... 200°C fino a MA150Q, di solito 40 ... 180°C                                |  |
|                                      |                                                                                                                                        | Tempo                                                                     | 3,0 min.                                 | 1,0 ... 20,0 minuti                                                               |  |
| Temperatura di Standby               | o Off<br>On                                                                                                                            | Temperatura                                                               | 40°C                                     | 40 ... 100°C                                                                      |  |
| Peso iniziale                        | o Off<br>On                                                                                                                            | Peso nominale                                                             | 5,0 g                                    | 0,2 g ... 90 % peso massimo                                                       |  |
| Avvio dell'analisi                   | Con stabilità dopo il tasto Enter<br>o Senza stabilità dopo la chiusura del coperchio<br>Con stabilità dopo la chiusura del coperchio  |                                                                           |                                          |                                                                                   |  |
| Fine dell'analisi                    | o Completamente autom.<br>Semiautomatica<br>Assoluta<br>Semiautomatica<br>Percentuale<br>Tempo<br>Manuale                              | Perdita<br>Intervallo di tempo<br>Perdita<br>Intervallo di tempo<br>Tempo | 5 mg<br>24 s<br>1 %<br>60 s<br>15,0 min. | 1 ... 50 mg<br>5 ... 300 s<br>0,1 ... 5,0 %<br>5 ... 300 s<br>0,1 ... 99,9 minuti |  |
| Lettura del risultato                | o Umidità (%L)<br>Sostanza secca (%R)<br>Rapporto (%LR)<br>Perdita di peso (mg)<br>Residuo (g)<br>Residuo (g/kg)<br>Grammi/litri (g/l) | Campione                                                                  | 1,0 l                                    | 0,0001 ... 9,9999 l                                                               |  |
| Stampa risultato provvisorio         | o Off<br>On                                                                                                                            | Intervallo                                                                | 0,1 min.                                 | 0,1 ... 10,0 minuti                                                               |  |
| Analisi del contenuto in ceneri      | o Off<br>On                                                                                                                            |                                                                           |                                          |                                                                                   |  |
| Righe di intestazione                | Riga 1<br>Riga 2                                                                                                                       | Vuoto<br>Vuoto                                                            | 20 caratteri max.<br>20 caratteri max.   |                                                                                   |  |
| Impostazione di fabbrica             | No<br>Sì                                                                                                                               |                                                                           |                                          |                                                                                   |  |



## Caratteristiche

### Numero dei programmi di essiccazione:

20 programmi

I programmi sono stati ordinati secondo il numero di programma.

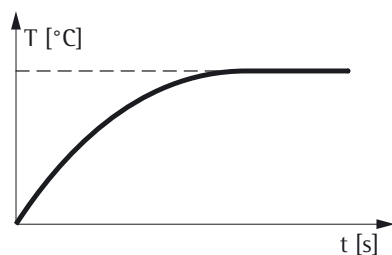
### Programmi di riscaldamento

Per l'analisi dell'umidità del materiale sono disponibili 2 programmi di riscaldamento:


- Essiccazione standard
- Essiccazione delicata

Essiccazione standard:

Per l'essiccazione standard, la temperatura finale viene introdotta dall'operatore.



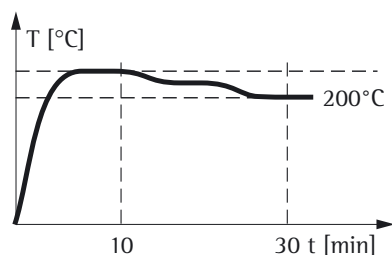Se è stata predefinita una temperatura nominale maggiore di 200°C, viene riscaldato fino al raggiungimento di tale temperatura, successivamente a partire dal 10° fino al 30° minuto, la temperatura viene abbassata in 5 livelli fino a 200°C.



Essiccazione delicata:

Riscaldare fino alla temperatura nominale (massimo 200°C) in un intervallo di tempo a scelta compreso tra 1 e 20 minuti.

### Temperatura di Standby

- Regolazione sulla temperatura prefissata se la camera per campioni è chiusa

### Peso iniziale

Il peso nominale può essere immesso dall'operatore solo come aiuto per la pesatura (non come condizione di avvio). I limiti  $\pm 20\%$  vengono visualizzati.

### Avvio dell'analisi

- Con stabilità dopo il tasto **Enter**:

Quando nella riga di funzione appare **AVVIO** e questo viene confermato con il tasto **Enter**, il peso iniziale viene registrato alla stabilità indipendentemente dalla condizione della copertura.

- Senza stabilità dopo la chiusura coperchio  
Se la condizione del peso iniziale è stata soddisfatta, viene richiesta la chiusura della copertura mediante un simbolo sul display (campo Simboli grafici).

Il peso iniziale viene registrato, senza stabilità, non appena la camera per campioni è chiusa.

L'analisi si avvia non appena la copertura è chiusa ed è trascorso il tempo di ritardo di 2 s oppure la camera per campioni è stata aperta manualmente e poi richiusa (vale per entrambi i criteri di avvio).

- Con stabilità dopo la chiusura coperchio  
Se la condizione del peso iniziale è stata soddisfatta, viene richiesta la chiusura della copertura mediante un simbolo sul display (campo Simboli grafici).

Il peso iniziale viene registrato con la stabilità non appena la camera per campioni è chiusa. Non ci sono ulteriori ritardi.

- Interruzione dell'analisi

La copertura può essere aperta e chiusa in qualsiasi momento senza annullare l'analisi per esempio per sottoporre i campioni a un ulteriore trattamento.

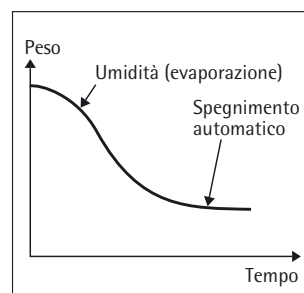
Aperto o chiudendo la copertura, l'apparecchio entra nello stato **PAUSA ANALISI** o **ANALISI**. Gli algoritmi per l'essiccazione/riscaldamento vengono interrotti mentre la copertura rimane aperta e solo dopo la sua chiusura vengono avviati nel modo opportuno e/o proseguiti.

### Fine della misurazione con criteri finali

- Completamente automatica
- Semiautomatica, assoluta
- Semiautomatica, percentuale
- Tempo
- Manuale

Completamente automatica:

L'analisi terminerà non appena la perdita di peso ogni 24 secondi è inferiore a un limite automaticamente preselezionato.



Semiautomatica, assoluta:

L'analisi terminerà non appena la perdita di peso per ogni intervallo di tempo prestabilito è inferiore a un limite preselezionabile in milligrammi. La perdita di peso viene immessa dall'operatore.

Semiautomatica, percentuale:

L'analisi terminerà non appena la perdita di peso in percentuale del peso totale è inferiore a un limite preselezionabile in percentuale. La percentuale viene immessa dall'operatore.

Tempo:

L'analisi terminerà allo scadere del tempo preselezionato.

Manuale:


Spegnimento con il tasto **Enter**.

### Lettura del risultato

Per il risultato di analisi visualizzato si possono selezionare le seguenti unità:

- Umidità %L
- Sostanza secca %R
- Rapporto %LR
- Perdita di peso mg
- Residuo g
- Residuo g/kg
- Grammi/litri g/l

### Stampa dei risultati provvisori

- I risultati provvisori possono essere stampati impostando «Off» solo con il tasto .
- I risultati provvisori possono essere stampati automaticamente dopo un intervallo di tempo impostabile.

### Analisi del contenuto in ceneri

Con questa impostazione è possibile eseguire una doppia analisi. Esempio: analisi dell'umidità e incenerimento dei fanghi di depurazione. Nella prima fase viene misurata l'umidità, poi il campione viene incenerito nel forno di ricottura. Nella seconda fase viene determinata la quantità di cenere presente nel peso finale.

Dopo la prima fase, invece di **FINE** sul display appare **CONTINUA**.

Tra la prima e la seconda fase, l'analizzatore d'umidità non può essere utilizzato per altri scopi.


### Righe di intestazione

Per il protocollo di essiccazione è possibile inserire delle righe di testo (2 righe con un massimo di 20 caratteri ciascuna). Se non viene immesso nessun testo, la riga in questione non viene stampata.

### Impostazione di fabbrica

I programmi di essiccazione possono essere ripristinati sull'impostazione di fabbrica.

### Stampa dei parametri di analisi

- Alla visualizzazione del programma desiderato: premere il tasto .

- > Stampa (esempio a destra)  
Le righe di testo che superano i 20 caratteri vengono tagliate

### Ulteriori funzioni

Nella memoria dei programmi sono possibili le seguenti funzioni:

- Presa in visione dei programmi
- Modifica delle impostazioni
- Memorizzazione delle modifiche al programma

```
-----
14.07.2006      12:40
MOD.      MA150Q-000230V
N.SER.      18701636
N.VER.      01-50-01
ID
-----
```

### PROGRAMMA

```
-----
P1
NOME DEL PROGRAMMA
NOME DEL PROGRAMMA:
MEYER
PROGRAMMA DI RISCAL-
DAMENTO
ESSICCAZIONE
STANDARD
TEMPERATURA:
105°C
TEMPERATURA DI
STANDBY
OFF
PESO INIZIALE
OFF
AVVIO DELL'ANALISI
SENZA STABILITÀ, DOPO
CHIUSURA
COPERCHIO
FINE DELL'ANALISI
COMPLETAMENTE AUTO-
MATICA
LETTURA DEL RISULTA-
TO
UMIDITA (%L)
STAMPA DEI RISULTATI
PROVVISORI
OFF
ANALISI DEL
CONTENUTO IN CENERI
OFF
RIGHE DI INTESTAZION
RIGA 1
RIGA 1:

RIGA 2
RIGA 2:
-----
```






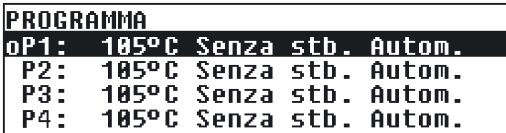




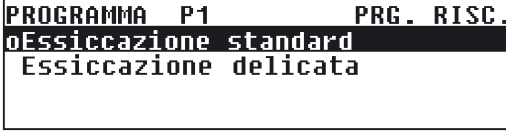


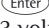

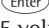



### Esempio: essiccazione standard con spegnimento completamente automatico

Si deve determinare il grado di umidità di 2 g di fecola di mais. In caso di surriscaldamento, il campione si può bruciare, ma il suo grado di sensibilità al calore non è superiore alla media. L'analisi deve terminare automaticamente al raggiungimento della costanza del peso.

Impostazioni (differiscono dall'impostazione di fabbrica):



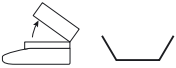



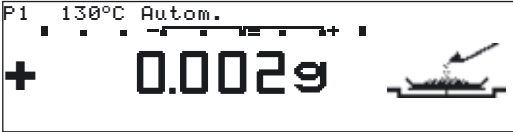
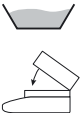
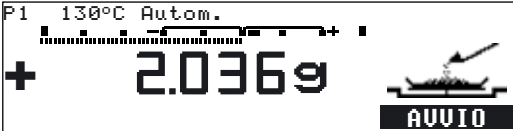

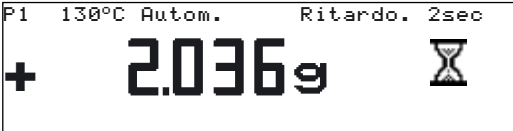

Numero del programma: 1  
Temperatura finale: 130°C  
Avvio dell'analisi: Con stabilità dopo il tasto Enter  
Fine dell'analisi: Completamente automatico (impostazione di fabbrica)

#### Parte A: Configurazione del programma di essiccazione

| Passo                                               | Premere il tasto (o azione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lettura/Uscita dati                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accendere l'analizzatore d'umidità               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Appare il logo Sartorius<br><br>Viene eseguito un autotest                            |
| 2. Selezionare la funzione <b>PROGRAM.</b>          |  oppure                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 3. Confermare la funzione <b>PROGRAM.</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4. Selezionare il programma <b>P1</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 5. Selezionare il <b>programma di riscaldamento</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6. Selezionare <b>Essiccazione standard</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 7. Immettere il valore di temperatura <b>130</b>    | <br>3 volte <br><br>5 volte <br> |  |

| Passo                                                                       | Premere il tasto (o azione) | Letture/Uscite dati                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Confermare il valore di temperatura                                      | Enter                       | <div>PROGRAMMA P1 PRG. RISC.</div> <div>oEssiccazione standard</div> <div>Essiccazione delicata</div>                                                |
| 9. Selezionare il parametro <b>Barra grafica</b>                            | CF<br>2 volte ↵             | <div>PROGRAMMA P1</div> <div>Programma di riscaldamento</div> <div>Temperatura standby</div> <div>Barra grafica</div> <div>Avvio della analisi</div> |
| 10. Confermare <b>Barra grafica</b>                                         | Enter                       | <div>PROGRAMMA P1 BAR. GRAF.</div> <div>oOff</div> <div>On</div>                                                                                     |
| 11. Selezionare l'impostazione <b>ON</b> e confermare                       | ↵<br>Enter                  | <div>P1 BAR. GRAF. ON</div> <div>Peso nom.: 5.0 g</div>                                                                                              |
| 12. Immettere il peso nominale <b>2.0</b>                                   | 3 volte ↵<br>Enter          | <div>P1 BAR. GRAF. ON</div> <div>Peso nom.: 2 g</div>                                                                                                |
| 13. Confermare il peso nominale                                             | Enter                       | <div>PROGRAMMA P1 BAR. GRAF.</div> <div>Off</div> <div>oOn</div>                                                                                     |
| 14. Selezionare il parametro <b>Avvio della analisi</b>                     | CF<br>↵                     | <div>PROGRAMMA P1</div> <div>Programma di riscaldamento</div> <div>Temperatura standby</div> <div>Barra grafica</div> <div>Avvio della analisi</div> |
| 15. Confermare l' <b>Avvio della analisi</b>                                | Enter                       | <div>PROGRAMMA P1 AVVIO</div> <div>Tasto ENTER, con stabilità</div> <div>oChiusura coperchio, senza stab.</div> <div>Tasto ENTER, senza stab.</div>  |
| 16. Selezionare <b>con stabilità</b> , dopo <b>tasto ENTER</b> e confermare | ↵<br>Enter                  | <div>PROGRAMMA P1 AVVIO</div> <div>oTasto ENTER, con stabilità</div> <div>Chiusura coperchio, senza stab.</div> <div>Tasto ENTER, senza stab.</div>  |
| 17. Uscire dalla funzione <b>PROGRAMMA</b>                                  | 3 volte CF                  |                                                                                                                                                      |

## Parte B: Esecuzione dell'analisi

| Passo                                                                                                                      | Premere il tasto (o azione)                                                                                                                                                                                                                                     | Lettura/Uscita dati                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Accendere l'analizzatore d'umidità                                                                                      |                                                                                                                                                                                | <p>Appare il logo Sartorius</p> <p>Viene eseguito un autotest</p>  |
| 2. Preparazione del campione: per l'amido di mais non è necessario                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
| 3. Aprire la camera per campioni e collocare un nuovo piattello portacampione                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| 4. Tarare il piattello portacampione: selezionare la funzione <b>TARA</b> e confermare                                     |  oppure <br> |                                                                   |
| 5. Distribuire circa 2 g di amido di mais in modo uniforme sul piattello portacampione<br>Chiudere la camera per campioni  |                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| 6. Avviare il programma di essiccazione                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                  |
| Dopo un ritardo di 2 secondi viene stampata l'intestazione del protocollo di analisi<br><br>(stampa: vedi pagina seguente) |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |

```

-----
14.07.2006      15:07
MOD.      MA150Q-000230V
N.SER.      18701636
N.VER.      01-50-01
ID
-----

```


```

Prg 1
Riscal.      STANDARD
Temp.finale  130°C
Temp.stdbby  OFF
Avvio        CON STABIL.
Fine         AUTOMATICA
Ps.in.+      2.036 g

```

Successivamente viene visualizzata la perdita di umidità attuale


```

P1 130°C Autom. 37°C 0.8min
+ 0.05%L 
INTERR.

```

Spegnimento completamente automatico dell'essiccazione se non viene più ravvisata nessuna perdita di peso (qui dopo 5,2 minuti)

```

P1 130°C Autom. 128°C 5.2min
+ 10.90%L 
END
NUOVO

```

Il piè di pagina del protocollo di analisi viene **stampato**

```

-----
Ps.fin+      1.814 g
5.2 +      10.90 %L
Nome:
-----

```

# Funzioni di regolazione «isoTest»

Le seguenti funzioni sono disponibili nel **SETUP**, voce di menù **isoTEST**:

- Regolazione del sistema di pesatura
  - Calibrazione/regolazione
  - Solo pesata
- Test dell'hardware
  - Controllo delle interfacce
  - Controllo del riscaldamento

Se nella camera per campioni si toglie il piattello portacampione e il ferma-piattello, si può accedere alle seguenti funzioni:

- Regolazione del riscaldamento
  - Regolazione temperatura punto 2
  - Regolazione temperatura punto 1

## Regolazione del riscaldamento

Con la regolazione della temperatura punto 1 e punto 2 così come con il set per la regolazione della temperatura YTM03MA (accessorio), si può regolare l'impostazione della temperatura dell'unità di riscaldamento.

## Regolazione del sistema di pesatura

### Calibrazione, regolazione

#### Scopo

Per calibrazione s'intende la determinazione dello scostamento tra il valore della massa visualizzato e il vero valore della massa. Durante la calibrazione non viene eseguito nessun intervento che modifica il sistema di pesatura.

Per regolazione s'intende quella funzione che elimina lo scostamento tra il valore di misura visualizzato e il vero valore di massa, cioè che riduce lo scostamento ai limiti di errore permessi.

#### Caratteristiche

La calibrazione avviene esternamente con il seguente peso standard: 100 g (accessorio)








I risultati della calibrazione e regolazione possono essere stampati in un protocollo conforme alle norme ISO/GLP, vedi pagina seguente.

## Calibrazione/regolazione esterna con un peso definito in fabbrica

Calibrazione e regolazione esterna della bilancia con un peso di regolazione di 100 g

| Passo                                              | Premere il tasto (o azione) | Lettura/Uscita dati |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1. Selezionare <b>SETUP</b> nella riga di funzione | oppure                      |                     |
| 2. Richiamare <b>SETUP</b>                         |                             |                     |
| 3. Selezionare <b>isoTEST</b>                      | 2 volte                     |                     |
| 4. Confermare <b>isoTEST</b>                       |                             |                     |
| 5. Confermare<br><b>Regolaz. sistema di pesata</b> |                             |                     |
| 6. Confermare<br><b>Calibrazione/regolazione</b>   |                             |                     |
| 7. Scaricare e tarare la bilancia                  |                             |                     |
| 8. Selezionare la funzione <b>CAL.</b>             |                             |                     |
| 9. Avviare la calibrazione                         |                             |                     |



| Passo                                                                                                                                                  | Premere il tasto (o azione)                                                         | Lettura/Uscita dati                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il sistema di pesatura viene preparato per la calibrazione<br>Dopo breve tempo appare                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| 10. Caricare la bilancia con il peso standard (qui 100,00 g)<br>Segno -: peso troppo leggero<br>Segno +: peso troppo pesante<br>Senza segno: peso o.k. | Collocare il peso di regolazione di 100 g                                           |                                                                                                                                                  |
| Dopo la calibrazione appare                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| 11. Se la regolazione del sistema di pesatura non è necessaria, selezionare il tasto funzione <b>FINE</b> e confermare                                 |    | <pre> ----- 14.07.2006      15:10 MOD.      MA150Q-000230V N.SER.      18701636 N.VER.      01-50-01 ID ----- Calibrazione esterna ID P Nominale+  100.000 g Diff.      -    0.002 g ----- 14.07.2006      15:12 Nome: ----- </pre> |
| 12. Altrimenti regolare il sistema di pesatura                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |
| Dopo la regolazione appare                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                |
| e viene stampato:<br>vedi pagina seguente                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |

| Passo                                 | Premere il tasto (o azione) | Lettura/Uscita dati                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Foglio di stampa dopo la regolazione: |                             | <pre> ----- 14.07.2006      15:15 MOD.      MA150Q-000230V N.SER.      18701636 N.VER.      01-50-01 ID ----- Calibrazione esterna ID P Nominale+  100.000 g Diff.      -    0.002 g Regolazione esterna               terminata Diff.      0.000 g ----- 14.07.2006      15:16 Nome: ----- </pre> |

13. Scaricare la bilancia

## Test dell'hardware




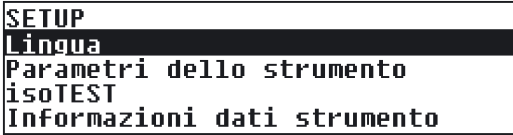






### Scopo

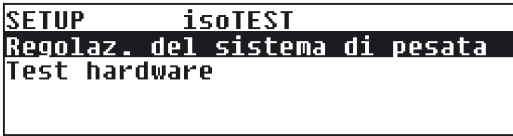Con i test dell'hardware viene controllato se la comunicazione del sistema con strumenti interni ed esterni funziona senza problemi. Questi test non sono test basilari dell'hardware.







Si possono testare i seguenti componenti dello strumento:

- Comunicazione SBI
- Riscaldamento

### Richiamo dei Test dell'hardware

| Passo                                                           | Premere il tasto (o azione)                                                                                                                                                                                                                                     | Lettura/Uscita dati                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Selezionare <b>SETUP</b> nella riga di funzione e confermare |  oppure <br> |    |
| 2. Selezionare <b>isoTEST</b> e confermare                      | 2 volte <br>                                                                                  |   |
| 3. Selezionare <b>Test dell'hardware</b> e confermare           | <br>                                                                                      |  |



### Controllo della comunicazione SBI

| Passo                                                                                                                                           | Premere il tasto (o azione)                                                                 | Lettura/Uscita dati                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Preparare l'uscita dati RS232 (vedi schema di assegnazione dei pin)                                                                          | collegare TxD (pin 2) con RxD (pin 3)                                                       |                                                                                       |
| 2. Richiamo dei Test dell'hardware                                                                                                              | vedi sopra                                                                                  |                                                                                       |
| 3. Selezionare la funzione Controllo delle interfacce e confermare                                                                              |          |  |
| 4. Confermare la funzione Controllo della comunicazione SBI                                                                                     |          |  |
| Terminato il test, appare come risultato:<br>Errore di test o Test ok (qui per es. Errore di test)<br>(il test viene ripetuto in modo continuo) |                                                                                             |  |
| 5. Uscire dal controllo della comunicazione SBI                                                                                                 | 2 volte  |                                                                                       |

Controllo I/O digitali

| Passo                                                                                                                               | Premere il tasto (o azione)                                                                | Lettura/Uscita dati                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Preparare i pin di test per l'uscita dati RS232 (vedi schema di assegnazione dei pin)                                            | Collegare il tasto universale (pin 15) con I/O digitali da controllare (pin 16 ... pin 19) |                                                                                                                                                                                 |
| 2. Richiamo dei Test dell'hardware                                                                                                  | vedi pagina precedente                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| 3. Selezionare la funzione<br>Controllo delle interfacce e confermare                                                               | Enter                                                                                      | <div>isoTEST    HARDWARE    INTERFACE</div> <div>Controllo comunicazione SBI</div> <div>Controllo I/O digitali</div>                                                            |
| 4. Selezionare la funzione<br>Controllo I/O digitali e confermare                                                                   | <div>✓</div> <div>Enter</div>                                                              | <div>HARDWARE    RISULTATO    DIG.-I/O</div> <div>Risultato:</div>                                                                                                              |
| Per ogni porta I/O viene visualizzato Errore di test o Test ok. Il controllo inizia di nuovo dalla prima porta dopo l'ultima porta. |                                                                                            | <div>HARDWARE    RISULTATO    DIG.-I/O</div> <div>Risultato:</div> <div>1: Errore di test</div> <div>2: Test OK</div> <div>3: Errore di test</div> <div>4: Errore di test</div> |
|                                                                                                                                     | 2 volte <div>CF</div>                                                                      |                                                                                                                                                                                 |

Controllo del riscaldamento

| Passo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Premere il tasto (o azione)   | Lettura/Uscita dati                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Richiamo dei Test dell'hardware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedi pagina precedente        |                                                                                                                                                                                |
| 2. Selezionare la funzione<br>Controllo riscaldamento e confermare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>✓</div> <div>Enter</div> | <div>CONT.RISC. 160°C</div> <div>+</div> <div>25°C</div> <div>FINE</div> <div>AVVIO</div>                                                                                      |
| 3. Avviare il controllo del riscaldamento:<br>funzione <b>AVVIO</b><br><br>Dopo l'avvio viene visualizzata la temperatura attuale (qui per es. 123°C)<br>e la durata del test (qui per es. 1,5 min)<br><br>Se la camera per campioni viene aperta,<br>il test s'interrompe finché questa non viene richiusa.<br><br>Lo strumento raggiunge dopo un determinato intervallo di tempo la temperatura nominale. | Enter                         | <div>CONT.RISC. 160°C    160°C    1.5min</div> <div>+</div> <div>123°C</div> <div></div>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | <div>CONT.RISC. 160°C    160°C    11.2min</div> <div>+</div> <div>160°C</div> <div></div> |
| 4. Uscire da Controllo riscaldamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>CF</div>                 |                                                                                                                                                                                |

# Uscita dati

Per l'uscita dei dati si hanno tre possibilità:

- Display dello strumento
- Stampante esterna (YDP02-OCE oppure YDP03-OCE)
- Interfaccia dati per periferiche (per es. computer)

## Visualizzazione sull'unità di visualizzazione e comando (Stampa dei valori di pesata e dei valori calcolati)

Il display è ordinato in 9 campi. In questi campi vengono emessi i dati riguardanti la bilancia, l'applicazione e il campione di pesata:


- Informazioni/stato del programma di essiccazione/funzione di test
- Simbolo di stampa
- Barra grafica
- Simbolo Busy
- Segni aritmetici
- Valore misurato/risultato
- Unità
- Simboli grafici
- Riga di funzione

## Informazioni sul programma di essiccazione /Funzioni di test

In questa riga sono rappresentati i dati del programma di essiccazione:

- |                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>P1</b>                  | - Numero del programma                             |
| <b>105°C</b>               | - Indicazioni relative alla temperatura            |
| <b>Auton.</b>              | - Criterio di spegnimento                          |
| <b>85°C    5.4min</b>      | - Temperatura attuale e tempo                      |
| <b>CONT.RISC.    160°C</b> | - Funzioni di test richiamate insieme ai parametri |

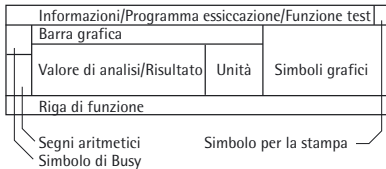
## Simbolo di stampa

In questo campo appare il simbolo di stampa: dopo aver premuto il tasto  oppure dopo l'avvio e la fine dell'analisi dell'umidità.

## Barra grafica (guida grafica)

Nella barra grafica appare durante la pesata iniziale il valore di misura relativo a un valore nominale con valori di tolleranza (-20%, +20%)

La barra grafica viene visualizzata se nel programma di essiccazione per la voce peso iniziale è stato selezionato **ON**





#### Simbolo Busy

In questo campo appare il simbolo Busy che rimane visualizzato durante lo svolgimento di elaborazioni interne attivate premendo un tasto.



#### Segni aritmetici

In questo campo sono rappresentati i segni aritmetici

#### Riga del valore misurato/risultato

In questa riga sono indicati:

- 5234 - il valore di pesata attuale
- 17.23 - i valori calcolati (per es. umidità %)

#### Unità

In questo campo sono indicati:

- g - l'unità di peso corrente (per es. g)
- °C - l'unità per la temperatura di essiccazione
- %L - l'unità per i valori calcolati (per es. per l'umidità)



#### Simboli grafici

In questo campo appaiono diversi simboli grafici che indicano, per es. l'azione successiva dell'operatore (per es. chiusura della copertura), che spiegano l'esecuzione di una funzione (per es. piattello portacampione con l'umidità che sta evaporando) oppure che simboleggiano funzioni interne che durano più a lungo (per es. una clessidra).

SETUP PROGRAM. **TARA**

#### Riga di funzione

In questa riga vengono rappresentate delle funzioni che una volta selezionate (su sfondo nero) permettono l'accesso a Setup e ai programmi applicativi oppure che possono essere avviate con il tasto Enter (per es. taratura, avvio, cal. per calibrazione ecc.)

In questa riga viene emesso anche il messaggio di errore.  
In questo caso l'intera riga viene sovrascritta.

# Interfaccia di comunicazione

## Scopo

L'analizzatore d'umidità possiede un'interfaccia dati alla quale può essere collegata una stampante esterna, un indicatore di stato, un PLC oppure un computer.


### Stampante esterna:

Tramite una stampante si possono stampare i protocolli e le impostazioni.

### Indicatore di stato:

L'indicatore di stato indica la condizione del modo operativo.

### PLC (Programmable Logic Controller):

Questo dispositivo indica la condizione del modo operativo ed è in grado di attivare la funzione del tasto  tramite l'ingresso digitale.

### Computer:

I valori misurati e calcolati possono essere inviati a un computer per un'ulteriore valutazione e documentazione.

## ⚠ Attenzione nell'usare cavi di collegamento RS232 già pronti:

Cavi RS232 di altri costruttori hanno spesso una collocazione dei pin non permessa per gli strumenti per pesare Sartorius! Controllare quindi prima del collegamento, gli schemi di collegamento e staccare le linee collegate che differiscono (per es. pin 6). La non osservanza di tale avvertenza può provocare il malfunzionamento o il danneggiamento della bilancia o degli accessori collegati.

## Caratteristiche

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo di interfaccia:                | interfaccia seriale                                |
| Modo di funzionamento:              | duplex completo                                    |
| Standard:                           | RS232                                              |
| Velocità di trasmissione:           | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 e 19200 baud |
| Numero dei bit di informazione:     | 7, 8 bit                                           |
| Parità:                             | nessuna, dispari, pari (none, odd, even)           |
| Numero dei bit di stop:             | 1 oppure 2 bit di stop                             |
| Funzionamento handshake:            | Software, hardware 1 carattere                     |
| Modo operativo:                     | SBI, XBPI <sup>1)</sup>                            |
| Indirizzo in linea <sup>2)</sup> :  | 0, 1, 2, ..., 30, 31                               |
| Formato dei dati in uscita con SBI: | 20 caratteri + CR LF                               |

<sup>1)</sup> Modo operativo XBPI sempre con 9600 baud, 8 bit, parità dispari, 1 bit di stop

<sup>2)</sup> L'indirizzo in linea riguarda solo il modo operativo XBPI

## Parametri impostati in fabbrica per il modo operativo SBI:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Velocità di trasmissione:       | 1200 baud            |
| Numero dei bit di informazione: | 7 bit                |
| Parità:                         | dispari (Odd)        |
| Bit di stop:                    | 1 bit di stop        |
| Handshake:                      | Hardware 1 carattere |
| Modo operativo:                 | SBI                  |

## Preparazione

- Per l'assegnazione dei pin e lo schema di assegnazione dei pin, vedi pagina 44 e 45.

### Formato dei dati in uscita

I contenuti della riga dei valori di misura e dell'unità di peso possono essere stampati con l'identificatore.

Esempio con identificatore

N + 3,4253 g

Vengono emessi 20 caratteri per riga.

Formato di uscita di 20 caratteri + CR LF

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| K | K | K | K | K | K | + | * | A | A  | A  | A  | A  | A  | A  | A  | *  | E  | E  | E  | CR | LF |
| * | * | * | * | * | - |   | . | . | .  | .  | .  | .  | .  | .  | .  | *  | *  | *  |    |    |    |
|   |   |   |   |   | * |   | * | * | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *  |    |    |    |    |    |    |

K: Carattere per l'identificatore

\*: Carattere vuoto

A: Carattere di lettura

E: Carattere per l'unità di misura

CR: Carriage Return

LF: Line Feed

Messaggio di errore

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| S | t | a | t | * | * | * | * | * | E  | R  | R  | *  | #  | #  | #  | *  | *  | *  | *  | CR | LF |

\*: Carattere vuoto


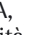
H: Sovraccarico

L: Carico insufficiente

###: Numero di errore

### Uscite digitali (indicatore di stato, PLC)


La relativa condizione del modo operativo viene emessa in base alla seguente tabella sulle uscite digitali (dal pin 16 al pin 19, vedi schema di assegnazione dei pin).

| Stato                                                | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 | Pin 19 | Descrizione                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun modo operativo                                | 0      | 0      | 0      | 0      | Nessun programma di essiccazione (OFF, STANDBY, SETUP, PROG, ERR xxx)                                                      |
| TARA pausa                                           | 0      | 0      | 1      | 0      | Aspettare il tasto  TARA              |
| TARA Aspettare fine taratura                         | 0      | 0      | 1      | 1      | Tasto  , TARA, aspettare la stabilità |
| PES. INIZIALE<br>Collocare il campione               | 0      | 1      | 0      | 0      | Lettura valore di misura                                                                                                   |
| PES. INIZIALE<br>Avvio dell'analisi<br>Pausa ANALISI | 0      | 1      | 0      | 1      | Lettura valore di misura                                                                                                   |
| ANALISI avviata                                      | 0      | 1      | 1      | 1      | Lettura valore di misura                                                                                                   |
| ANALISI<br>Lettura valore di misura                  | 0      | 1      | 1      | 0      | Lettura valore di misura                                                                                                   |
| FINE ANALISI                                         | 1      | 0      | 0      | 0      | Lettura valore di misura                                                                                                   |
| INTER. ANALISI                                       | 1      | 1      | 1      | 0      | Lettura valore di misura                                                                                                   |



### Comando a distanza (computer)

Le funzioni SBI per il comando a distanza sono utili nel momento in cui è possibile leggere lo stato applicativo attuale dell'apparecchio per esempio con il comando ESC ars\_ (vedi pagina seguente). La risposta al comando ESC ars\_ dall'apparecchio ha il formato XXX xx zz ff.

| Risposta dell'apparecchio | Significato                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XXX                       | Applicazione attiva                                                                                   |
| xx                        | Stato applicativo                                                                                     |
| zz                        | Stato della copertura                                                                                 |
| ff                        | Funzione del tasto  |

| XXX | Significato                                            |
|-----|--------------------------------------------------------|
| MAN | Analisi dell'umidità/<br>menù Setup/menù del programma |
| CBA | Cal/reg. bilancia                                      |
| CHT | Regolazione riscaldamento                              |
| CMS | Regolazione analisi                                    |
| THW | Test Hardware                                          |

| xx | Stato operativo    | Azione                                                       | Display principale |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | TARA               | Tarare il piattello portacampione                            | Valore di pesata   |
| 2  | PES. INIZIALE      | Collocare il campione                                        | Valore di pesata   |
| 3  | PES. INIZIALE      | Avvio analisi                                                | Valore di pesata   |
| 4  | TARA/AVVIO ANALISI | Attendere la stabilità                                       | Scuro              |
| 5  | TARA               | Attendere l'avvenuta taratura                                | Scuro              |
| 6  | AVVIO ANALISI      | Chiudere la camera per campioni, decorre il tempo di ritardo | Valore di pesata   |
| 7  | ANALISI            | Analisi attiva                                               | Risultato          |
| 8  | PAUSA ANALISI      | Copertura aperta                                             | Valore di pesata   |
| 9  | FINE ANALISI       | Analisi terminata                                            | Risultato          |
| 14 | SETUP/PROGRAMMA    | Impostazione dei parametri                                   | Display menù       |
| 15 | ERRORE             | L, H, Errore valore di pesata, 50, 53, 54                    | L, H, ERR xxx      |

| zz | Significato           |
|----|-----------------------|
| 0  | Aprire la copertura   |
| C  | Chiudere la copertura |

| ff | Significato          |
|----|----------------------|
| 0  | Nessun Help di linea |
| 1  | Help di linea 1      |
| 2  | Help di linea 2      |
| 3  | Help di linea 3      |

Formato dei dati in entrata

Comando a distanza (computer)

È possibile trasmettere comandi alla bilancia tramite il computer collegato con l'interfaccia per poterne attivare le funzioni.

Questi sono comandi di controllo e possono avere dei formati diversi. I comandi di controllo hanno al massimo 26 caratteri. Ognuno di essi deve essere inviato conformemente alle impostazioni Setup per la trasmissione dei dati.

Formato per i comandi di controllo

|            |     |   |                          |                          |    |    |    |    |
|------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|----|----|----|----|
| Formato 1: | ESC | ! | CR                       | LF                       |    |    |    |    |
| Formato 2: | ESC | ! | #                        | _                        | CR | LF |    |    |
| Formato 3: | ESC | ! | (carattere alfanumerico) |                          | _  | CR | LF |    |
| Formato 4: | ESC | ! | #                        | (carattere alfanumerico) |    | _  | CR | LF |

ESC: Escape  
!: Identificatore di comando  
#: Cifra  
\_: Trattino basso (ASCII: 95)  
CR: Carriage Return (opzionale)  
LF: Line Feed (opzionale)

| Formato 1 (per es. ESC K) |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| !                         | Significato             |
| K                         | Modo di pesata 1        |
| L                         | Modo di pesata 2        |
| M                         | Modo di pesata 3        |
| N                         | Modo di pesata 4        |
| O                         | Blocco della tastiera   |
| P                         | Print                   |
| Q                         | Beep (segnale acustico) |
| R                         | Sblocco della tastiera  |
| S                         | Riavvio                 |

| Formato 2 (per es. ESC x1_) |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| !#                          | Significato                                                               |
| acc                         | solo comandi SBI, nessuna uscita di stampa                                |
| acp                         | SBI con uscite di stampa                                                  |
| ars                         | Lettura dello stato                                                       |
| kF1                         | Tasto                                                                     |
| kF2                         | Tasto                                                                     |
| kF3                         | Tasto                                                                     |
| kF11                        | Tasto                                                                     |
| x1                          | Print modello                                                             |
| x2                          | Print numero di serie                                                     |
| x3                          | Print della versione del software del sistema di pesata                   |
| x4                          | Print della versione del software dell'unità di visualizzazione e comando |
| x5                          | Print N. d'identif. (GLP)                                                 |

| Formato 3: |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| !          | Significato                                                              |
| t          | Immissione alfanumerica (numero di caratteri massimo in base al display) |

| Formato 4: |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| !#         | Significato                                       |
| z5         | Immissione N. d'identif. (GLP) (max 14 caratteri) |

Ingresso digitale (PLC)

Il comando a distanza avviene tramite dei normali pulsanti (pin 15). I comandi vanno impostati nel menù (**Setup, Dispositivo, Commutatore esterno**):  
Tasto Enter

Lettore di codici a barre/  
Tastiera aggiuntiva

È possibile collegare al pin 15 e al pin 19 della presa D-SUB-25 (vedi schema di assegnazione dei pin) un lettore di codici a barre o una tastiera aggiuntiva. A questo proposito è necessario impostare nel menù (**Setup, Dispositivo, Commutatore esterno: Lettore di codici a barre/Tastiera aggiuntiva**). L'assegnazione dei tasti della tastiera aggiuntiva si presenta in questo modo:

| Tasti della tastiera aggiuntiva | Significato |
|---------------------------------|-------------|
| F6                              | Tasto       |
| F7                              | Tasto       |
| F8                              | Tasto       |
| F10                             | Tasto       |
| F11                             | Tasto       |
| Return                          | Tasto       |
| Barra spaziatrice               | Tasto       |
| Cursore su                      | Tasto       |
| Cursore giù                     | Tasto       |
| Cursore a destra                | Tasto       |
| Esc                             | Tasto       |
| Print                           | Tasto       |

## Sincronizzazione

Nello scambio di dati fra l'analizzatore d'umidità e il computer vengono trasmesse attraverso l'interfaccia stringhe di dati costituite da caratteri ASCII. Affinché lo scambio dei dati avvenga senza errore, occorre che i parametri dell'interfaccia: velocità di trasmissione, parità, modo di handshake e formato dei caratteri siano gli stessi su entrambe le unità.

L'analizzatore d'umidità può essere adattato allo strumento collegato modificando i parametri nel Setup.

Se l'interfaccia dati rimane aperta (nessuna periferica collegata) non viene generato alcun messaggio di errore.

## Handshake

L'interfaccia dati dell'analizzatore d'umidità SBI (Sartorius Balance Interface) ha una memoria tampone per la trasmissione e la ricezione. Nel Setup della bilancia si possono impostare i diversi modi di handshake:

- Handshake via hardware(CTS/DTR)
- Handshake via software(XON, XOFF)

### Handshake via hardware

Con l'handshake via hardware si può inviare ancora 1 segnale dopo CTS.

### Handshake via software

Handshake via software viene comandato tramite XON e XOFF. All'accensione dello strumento deve essere inviato uno XON onde abilitare lo strumento collegato alla ricezione.

Se nel Setup è impostato handshake via software, allora handshake via hardware viene attivato ogni volta dopo handshake via software.

### Sequenza della trasmissione dati:

```
Analizzatore  -- byte -->  Computer
d'umidità    -- byte -->  (dispositivo
(Dispositivo -- byte -->  ricevente)
trasmittente) -- byte -->
               <-- XOFF --
               -- byte -->
               -- byte -->
               ...
               (Pausa)
               ...
               <-- XON --
               -- byte -->
               -- byte -->
               -- byte -->
               -- byte -->
```

## Dispositivo trasmittente:

La ricezione di XOFF inibisce ulteriori trasmissioni di caratteri.  
La ricezione di XON riabilita il dispositivo trasmittente a inviare altri dati.


## Dispositivo ricevente:

Per non caricare la trasmissione con troppi identificatori di comando, il comando di abilitazione XON viene trasmesso dopo che la memoria tampone si è quasi svuotata.

## Emissione della stringa di dati

I dati possono essere emessi dopo un comando di stampa oppure automaticamente, in sincronia con il display.

## Emissione della stringa di dati dopo il comando di stampa

Il comando di stampa può essere inviato tramite pressione del tasto  oppure tramite un comando software (ESC P).

## Schema di assegnazione dei pin

### **Presa dell'interfaccia:**

25 pin. D-Submini DB25S con  
raccordo a vite

### **Connettore maschio richiesto (specifiche consigliate):**

25 pin. D-Submini DB25S con  
morsetto per il cavo di schermatura  
integrato, piastrina di protezione  
(Amp tipo 826 985-1C) e viti  
di fissaggio (Amp tipo 164 868-1)


### **Assegnazione dei pin:**

Pin 1: segnale di terra  
Pin 2: uscita dati (TxD)  
Pin 3: ingresso dati (RxD)  
Pin 4: «signal return» (TxD/RxD)  
Pin 5: Clear to Send (CTS)  
Pin 6: collegato internamente  
Pin 7: massa interna  
Pin 8: massa interna  
Pin 9: Reset \_ In \*)  
Pin 10: -12 V  
Pin 11: +12 V  
Pin 12: Reset \_ Out \*)  
Pin 13: + 5 V  
Pin 14: massa interna  
Pin 15: ingresso digitale  
(Lettore di codici a barre/  
Tastiera aggiuntiva)  
Pin 16: uscita digitale  
Pin 17: uscita digitale  
Pin 18: uscita digitale  
Pin 19: uscita digitale  
(Lettore di codici a barre/  
Tastiera aggiuntiva)  
Pin 20: Data Terminal Ready (DTR)  
Pin 21: massa della tensione di  
alimentazione «COM»  
Pin 22: non collegato  
Pin 23: non collegato  
Pin 24: +10 V  
Pin 25: 5 V


\*) = riavvio hardware

# Schema di collegamento

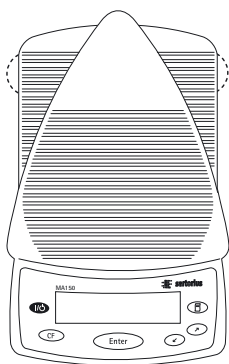
- Collegamento di un computer oppure uno strumento periferico all'analizzatore d'umidità secondo lo standard RS232C/V24 per linee di trasmissione



Analizzatore d'umidità

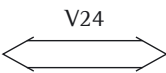


Periferica

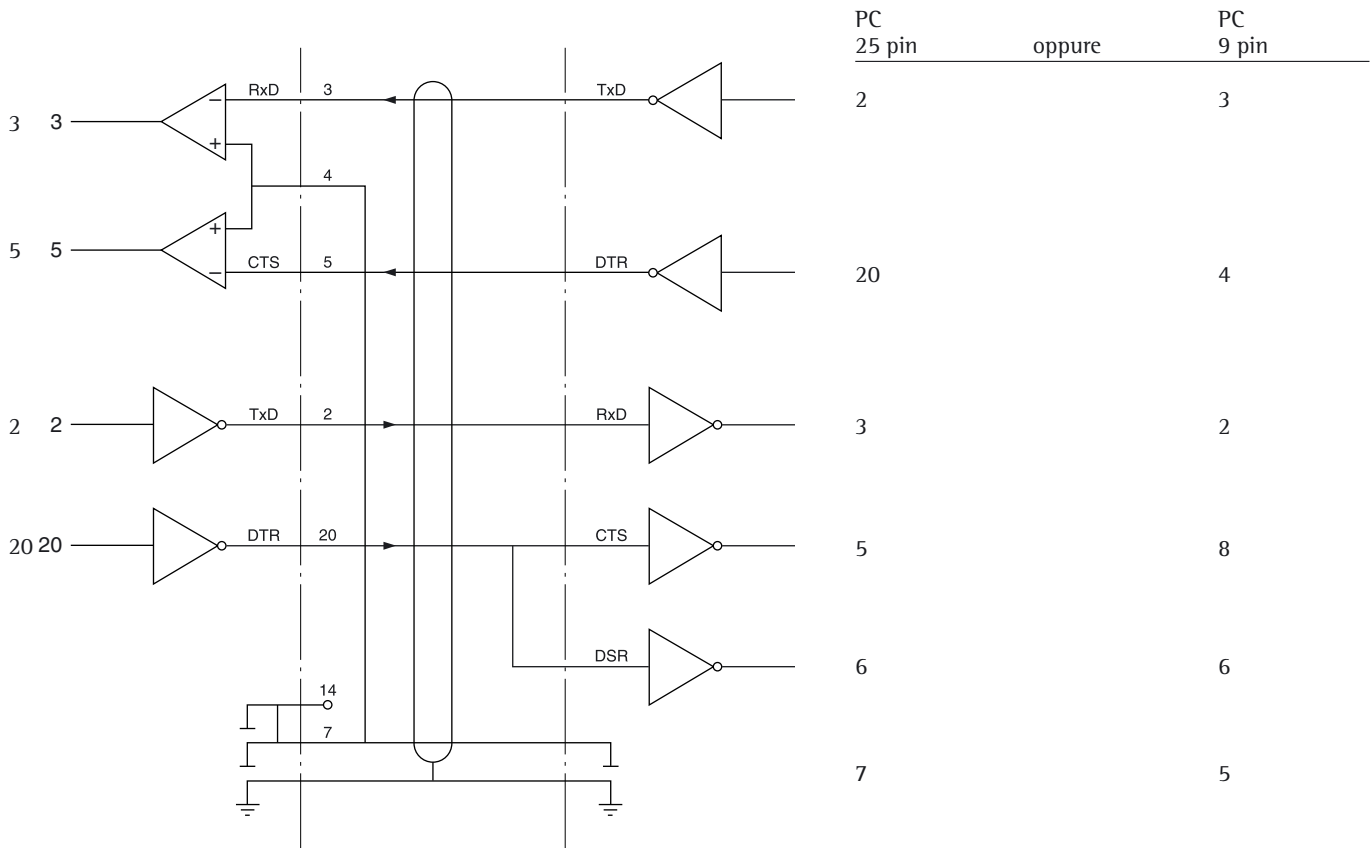

Tipo di cavo corrispondente a AWG 24

# Messaggi di errore

I messaggi di errore vengono visualizzati sul display principale, ossia nella riga di testo, per circa 2 secondi. Poi il programma ritorna automaticamente alla modalità di pesata.

| Display                                                      | Causa                                                                                                                                                                                                  | Rimedio                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non appaiono i segmenti luminosi                             | Mancanza di tensione<br>Cavo di alimentazione non inserito                                                                                                                                             | Controllare se c'è tensione<br>Collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica                                      |
|                                                              | Fusibili difettosi                                                                                                                                                                                     | Sostituire i fusibili                                                                                                   |
| <b>H</b>                                                     | Il peso eccede il campo di pesata                                                                                                                                                                      | Scaricare il fermapiattello                                                                                             |
| <b>L</b> oppure <b>ERR 54</b>                                | Il fermapiattello non è a posto                                                                                                                                                                        | Posizionare il fermapiattello                                                                                           |
| <b>ERR 01</b><br>> Campo di lettura                          | Uscita dati non compatibile con il formato di uscita                                                                                                                                                   | Eseguire l'impostazione corretta nel nel Setup                                                                          |
| <b>ERR 02</b><br>Cal. n. possibile                           | La condizione di regolazione non è stata rispettata, per es.:<br>– non è stata eseguita la taratura<br>– fermapiattello caricato                                                                       | Regolare solo dopo l'azzeramento del display<br>Tarare con il tasto funzione <b>TARA</b><br>Scaricare il fermapiattello |
| <b>ERR 03</b><br>Cal./reg.interruz.                          | L'operazione di regolazione non si è potuta concludere all'interno di un intervallo di tempo definito                                                                                                  | Attendere il tempo di preriscaldamento e regolare di nuovo                                                              |
| <b>ERR 30</b><br>Stampa bloccata                             | Interfaccia dati per la stampa bloccata                                                                                                                                                                | Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius                                                                     |
| <b>ERR 31</b><br>Stampa bloccata                             | Lo strumento esterno non risulta pronto alla ricezione (handshake interfaccia timeout XOFF, CTS)                                                                                                       | Inviare XON, liberare CTS                                                                                               |
| <b>ERR 53</b><br>Nessun val. an.                             | Manca la compensazione della temperatura                                                                                                                                                               | Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius                                                                     |
| <b>ERR 101</b><br>Lettura permanente del disegno a scachiera | Tasti che si bloccano oppure tasto azionato durante l'accensione<br>Tasto  azionato durante l'accensione o bloccato | Sbloccare il tasto<br>o<br>Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius                                          |
| <b>ERR 320</b>                                               | Memoria del programma operativo difettosa                                                                                                                                                              | Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius                                                                     |
| <b>ERR 340</b>                                               | Parametri di funzionamento (EEPROM) difettosi                                                                                                                                                          | Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius                                                                     |
| <b>ERR 341</b>                                               | Batterie scariche per programma di essiccazione                                                                                                                                                        | Lasciare acceso lo strumento per almeno 10 ore                                                                          |
| <b>ERR 342</b>                                               | Parametri di funzionamento (EEPROM) eccetto i parametri d'impostazione difettosi                                                                                                                       | Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius                                                                     |
| <b>NESSUNA PP</b>                                            | Sistema di pesatura difettoso                                                                                                                                                                          | Rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius                                                                     |
| <b>Bloccato</b>                                              | Esecuzione della funzione bloccata                                                                                                                                                                     | Nessuna                                                                                                                 |
| xxxxx <b>troppo piccolo</b>                                  | Immissione errata (possibile per tutti i programmi applicativi), per es.:<br>Immissione alfabetica non permessa                                                                                        | Rispettare la procedura operativa                                                                                       |
| xxxxx <b>troppo grande</b>                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |

Problema...: vedi pagina seguente

| Display       | Causa                                                                                                                                                     | Rimedio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problema ...: | La temperatura selezionata è troppo alta e il campione si ossida<br>Il campione bolle o si brucia<br>e a causa degli schizzi cambia il peso continuamente | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ridurre la temperatura di essiccazione</li> <li>– Mettere un filtro in fibra di vetro sul campione</li> <li>– Ridurre la quantità di campione o distribuirla in modo uniforme</li> <li>– Selezionare il criterio di spegnimento semiautomatico o lo spegnimento in funzione del tempo</li> </ul> |
|               | Tempo di analisi troppo lungo                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aumentare la temperatura</li> <li>– Ridurre la quantità di campione</li> <li>– Effettuare un'essiccazione da 2 a 3 minuti con il piattello porta-campione vuoto (preriscaldamento)</li> </ul>                                                                                                    |
|               | Il campione perde peso prima dell'avvio dell'analisi                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Togliere il piattello e portare il campione lontano dallo strumento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Il campione è liquido o pastoso                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Utilizzare filtri in fibra di vetro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | Il campione possiede poca umidità                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Aumentare la quantità di campione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Rendimento del riscaldamento insufficiente                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pulire la sonda termica</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | Luogo d'installazione instabile (vibrazioni, ecc.)                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Cambiare il luogo d'installazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Se si manifestano altri errori, telefonare al Servizio Assistenza Tecnica Sartorius.

## Cura e manutenzione

### Servizio

Una regolare manutenzione del Vostro strumento da parte del Servizio di Assistenza Tecnica Sartorius prolunga la vita dello strumento. Sartorius può offrire dei contratti di manutenzione ciclici che vanno da 1 mese fino a 2 anni.

La frequenza degli intervalli di manutenzione dipende dalle condizioni di funzionamento e dalle richieste di tolleranza dell'utente.

### Riparazioni

Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale specializzato. Le riparazioni improprie possono essere molto pericolose per l'operatore.

### Pulizia

I vapori raffreddanti, a seconda del tipo di campione, possono condensare sulla copertura dell'apparecchio e modificarne la colorazione. Questo però non è un difetto dell'apparecchio.

⚠ Non deve entrare liquido o polvere nello strumento

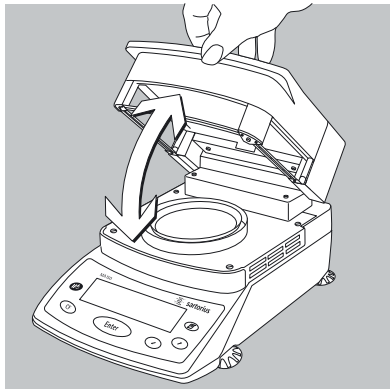
⚠ Non utilizzare detergenti aggressivi (solventi, agenti abrasivi o simili), bensì solo un panno leggermente inumidito con acqua saponata

● Staccare l'alimentazione elettrica: togliere la spina dalla presa; in caso staccare il cavo dati dall'analizzatore d'umidità

○ L'anello di protezione contro le correnti d'aria e il fermapiattello possono essere tolti per la pulizia

● Togliere i resti di campione/polvere con attenzione usando un pennello o una piccola aspirapolvere

● Asciugare lo strumento con un panno morbido




### Pulizia dell'unità di riscaldamento e della sonda termica


● Aprire il coperchio

⚠ Pericolo: i morsetti di collegamento dell'unità di riscaldamento sono sotto tensione

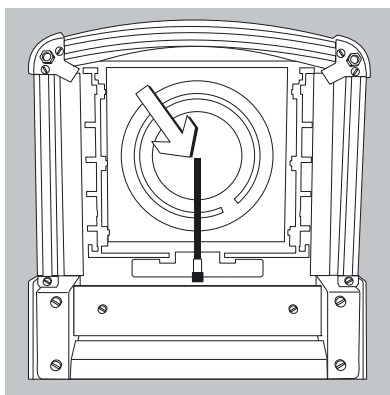● **Staccare l'alimentazione elettrica:** togliere il cavo di alimentazione dalla presa e nel caso staccare il cavo dati se collegato alla bilancia



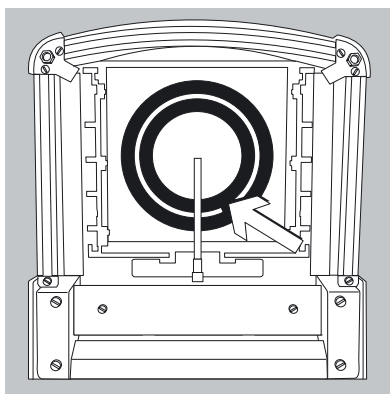● Liberare con attenzione la sonda termica dai depositi



● Pulire il radiatore ceramico con un pennello oppure con un detergente per vetri disponibile in commercio.

● Pulire il vetro di protezione del radiatore al quarzo con un detergente per vetri disponibile in commercio.



### Controllo di sicurezza

Se Vi sembra che la sicurezza operativa dello strumento non sia più garantita:

- Staccare l'alimentazione elettrica:  
togliere il cavo di alimentazione dalla presa
- > assicurare lo strumento contro un eventuale utilizzo
- La sicurezza operativa dello strumento non è più garantita quando:
- l'apparecchio o il cavo di alimentazione presentano danni visibili;
- lo strumento non funziona più correttamente
- dopo uno stoccaggio prolungato in condizioni sfavorevoli
- dopo pesanti sollecitazioni di trasporto

In questo caso rivolgetevi al più vicino Centro Assistenza Tecnica Sartorius. Solo personale autorizzato dotato della necessaria documentazione può eseguire lavori di riparazione e manutenzione della strumentazione in quanto:

- ha accesso alla documentazione e alle istruzioni per la riparazione.
- ha partecipato ai relativi corsi di formazione

Si raccomanda un controllo regolare da parte di un tecnico specializzato dei seguenti punti:

- Resistenza del conduttore di protezione < 0,2 Ohm con uno strumento di misurazione disponibile in commercio
- Resistenza di isolamento > 2 MOhm con una tensione continua di almeno 500 V per un carico di 500 kOhm

La frequenza e l'entità dei controlli dovrebbe essere fissata da un tecnico specializzato in base alle condizioni ambientali e il luogo di installazione dello strumento; comunque almeno una volta all'anno.



L'imballaggio non più utilizzato può essere portato al centro di smaltimento dei rifiuti. L'imballaggio consiste completamente di materie non inquinanti, riciclabili come materie prime secondarie.

L'apparecchio, inclusi gli accessori, le pile e batterie ricaricabili, non appartiene alla categoria di rifiuti domestici. La legislazione dell'UE prescrive nei propri Stati membri la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rispetto ai rifiuti municipali misti ai fini di un loro successivo recupero, reimpiego e riciclaggio. In Germania e in alcuni altri Paesi, Sartorius stessa s'incarica del ritiro e dello smaltimento, secondo le leggi vigenti, delle proprie apparecchiature elettriche ed elettroniche. Queste apparecchiature non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici – ciò vale anche per i piccoli esercenti – o non devono essere portate ai centri di raccolta rifiuti locali.

Per maggiori informazioni sulle possibilità di smaltimento, potete rivolgerVi in Germania e negli Stati membri dello Spazio economico europeo ai nostri addetti del Servizio Assistenza locale oppure al nostro Servizio Assistenza di Goettingen, in Germania.

Sartorius  
Service Center  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen, Germania

Nei Paesi che non fanno parte dello Spazio economico europeo o in cui non è presente una filiale, una succursale o un rivenditore Sartorius, prego rivolgersi alle autorità locali o alle aziende incaricate dello smaltimento.

Togliere le pile e le batterie ricaricabili e non ricaricabili prima dello smaltimento dell'apparecchio. Se sono scariche, prego smaltirle negli appositi contenitori per la raccolta.

Le apparecchiature contaminate con sostanze nocive (contaminazione ABC) non saranno ritirate dalla Sartorius AG, dalle sue filiali, succursali e dai suoi rivenditori, né per lavori di riparazione né per lo smaltimento. Maggiori informazioni, insieme agli indirizzi dei centri di servizio, riguardanti le modalità per la riparazione o lo smaltimento del Vostro apparecchio si trovano nel foglietto di istruzioni allegato, oppure sono disponibili sul nostro sito Internet ([www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)).

# Prospetto

## Dati tecnici

### Funzioni di essiccazione:

| Modello                        | MA150C                                                        | MA150Q              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fonte di calore                | radiatore ceramico                                            | radiatore al quarzo |
| Intervallo di temperatura      | 40–180°C                                                      | 40–220°C            |
| Impostazione della temperatura | impostabile in incrementi di 1°C                              |                     |
| Regolazione della temperatura  | con il set di regolazione della temperatura YTM03MA / YTM05MA |                     |

### Funzioni di pesata:

|                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Campo di pesata                                           | 150 g                                                                  |
| Precisione di lettura dello strumento                     | 1 mg, 0,01% di umidità                                                 |
| Riproducibilità, tipico (%)                               | – campione a partire da 1g: 0,2%<br>– campione a partire da 5 g: 0,05% |
| Peso di regolazione esterno (classe di precisione minima) | 100 g (E2)                                                             |
| Dimensioni del piattello portacampione                    | Ø 90 mm                                                                |

### Parametri di essiccazione:

|                            |                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programmi di riscaldamento | standard, delicata                                                                                                           |
| Durata dell'essiccazione   | 0,1 fino a 99,9 minuti                                                                                                       |
| Programmi memorizzabili    | 20                                                                                                                           |
| Criteri di spegnimento     | completamente automatico, semiautomatico (assoluto, percentuale), intervalli di tempo (1 + 99,9 min.), manuale               |
| Lettura del risultato      | Umidità, sostanza secca, rapporto, perdita di peso, residuo (g oppure g/kg), g/l (con immissione della quantità di campione) |
| Peso iniziale minimo       | 0,100 g                                                                                                                      |

### Strumento (Hardware):

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (L×P×A)             | 213×320×181 mm                                                          |
| Peso netto, circa              | 5,1 kg                                                                  |
| Tensione di rete               | 230 V oppure 115 V (secondo la versione dello strumento), –15% ... +10% |
| Frequenza di rete              | 48–60 Hz                                                                |
| Fusibili                       | 2 (filo neutro/fase), 6,3 AT, 5×20 mm (interno)                         |
| Campo di temperatura di lavoro | +10 ... +30°C                                                           |
| Potenza assorbita              | massimo 700 VA                                                          |
| Interfaccia integrata          | RS232C                                                                  |
| Formato:                       | 7 bit ASCII, 1 bit di start, 1 oppure 2 bit di stop                     |
| Parità:                        | dispari oppure pari                                                     |
| Velocità di trasmissione:      | 150 fino a 19200 baud                                                   |
| Handshake:                     | software oppure hardware                                                |
| Ingresso digitale:             | 1, funzione impostabile                                                 |
| Uscita digitale:               | 4, condizione del modo operativo                                        |

## Accessori (opzionali)

| Articolo                                                                                                                                 | Codice d'ordinazione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Stampante esterna                                                                                                                        | YDP20-OCE            |
| Materiale d'uso per stampante:                                                                                                           |                      |
| – 5 rotoli di carta                                                                                                                      | 69 06937             |
| – nastro inchiostro                                                                                                                      | 69 06918             |
| Set di regolazione della temperatura                                                                                                     | YTM03MA              |
| Pannelli sostituibili per la copertura ribaltabile in alluminio<br>(non consigliati per modelli MA...Q con radiatore al quarzo)          | YDS04MA              |
| Valigetta per il trasporto/per dimostrazioni                                                                                             | YDB05MA              |
| Software per l'acquisizione dei dati di analisi                                                                                          | YMW02MA              |
| Materiale di consumo:                                                                                                                    |                      |
| – 80 piattelli portacampione monouso, Ø 90 mm (alluminio)                                                                                | 69 65542             |
| – 80 filtri in fibra di vetro (per sostanze liquide)                                                                                     | 69 06940             |
| Cavo d'interfaccia (RS232/25 pin)                                                                                                        | 69 57312             |
| Peso di regolazione:                                                                                                                     |                      |
| – 100 g (E2)                                                                                                                             | YCW5128-00           |
| Procedure operative standard (SOP)<br>per un utilizzo perfetto dell'analizzatore d'umidità<br>nei sistemi di assicurazione della qualità | YSL02A               |
| Pezzi di ricambio                                                                                                                        |                      |
| Copertura di protezione                                                                                                                  | 6960MA02             |
| Pinzetta                                                                                                                                 | 69MA0072             |

Ulteriori pezzi di ricambio sono disponibili tramite il Servizio Sartorius.



**sartorius**  
mechatronics



## EG-Konformitätserklärung *EC Declaration of Conformity*

Sartorius Weighing Technology GmbH  
Weender Landstrasse 94 - 108  
D-37075 Goettingen, Germany

erklärt, dass das Betriebsmittel  
*declares that the equipment*

Geräteart: **Feuchtebestimmer**  
*Device type: Moisture analyzer*

Baureihe / *Type series:* **MA35M-..., MA100-..., MA150-..., LMA200PM-...**

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung mit den grundlegenden Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt:  
*in the form as delivered complies with the basic requirements of the following European Directives:*

Richtlinie 2004/108/EG **Elektromagnetische Verträglichkeit**  
*Directive 2004/108/EC Electromagnetic compatibility*

Richtlinie 2006/95/EG **Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen**  
*Directive 2006/95/EC Electrical equipment designed for use within certain voltage limits*

Das Gerät erfüllt die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierten Europäischen Normen.  
*The apparatus meets the applicable requirements of the harmonized European Standards listed below.*

1. Richtlinie 2004/108/EG / *Directive 2004/108/EC*  
EN 61326-1:2006 **Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61326-1:2005)**  
*Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements (IEC 61326-1:2005)*
2. Richtlinie 2006/95/EG / *Directive 2006/95/EC*  
EN 61010-1:2001 **Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61010-1:2001)**  
*Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2001)*

Jahr der Anbringung der CE-Kennzeichnung / *Year of attachment of CE marking:* **11**

Sartorius Weighing Technology GmbH  
Goettingen, 2011-11-03

  
Dr. Reinhard Baumfalk  
Vice President R&D

  
Dr. Dieter Klausgrete  
Leitung International Certification Management  
*Head of International Certification Management*

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten EG-Richtlinien, ist jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die Sicherheitshinweise der zugehörigen Produktdokumentation sind zu beachten.  
*This declaration certifies conformity with the above mentioned EC Directives, but does not guarantee product attributes. Unauthorised product modifications make this declaration invalid. The safety information in the associated product documentation must be observed.*

SWT11CE017

65711-000-58













SOP-3.RD-045-f02







# Registro delle parole chiave

|                                            | Pagina                                          |                                               | Pagina                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Accensione                                 | 8, 27, 29, 43, 46                               | isoTEST                                       | 12 segg., 18, 31 segg.                      |
| Accessori                                  | 2, 4, 31, 51                                    | Istruzioni di sicurezza e avvertenza          | 4                                           |
| Analisi del contenuto in ceneri            | 24, 26                                          | Istruzioni di sicurezza                       | 4, 8                                        |
| Assegnazione dei pin                       | 44                                              |                                               |                                             |
| Avvio dell'analisi                         | 24 segg.                                        |                                               |                                             |
|                                            |                                                 | Lettore di codici a barre                     | 42                                          |
| Calibrazione                               | 31 segg., 38                                    | Lettura del risultato                         | 24 segg., 50                                |
| Camera per campioni                        | 8, 23, 25, 29, 31, 36                           | Livellamento                                  | 8                                           |
| Collegamento alla rete                     | 6 segg.                                         |                                               |                                             |
| Condizioni di stoccaggio e di trasporto    | 5, 49                                           | Manutenzione                                  | 48                                          |
| Configurazione in base al sistema          | 21                                              | Messa in funzione                             | 4 segg.                                     |
| di analisi esistente                       |                                                 | Messaggi di errore                            | 12, 43, 46 segg.                            |
| Consigli per l'installazione               | 5                                               | Misure di sicurezza                           | 7                                           |
| Consulenza applicativa                     | 2                                               | Modo di analisi                               | 24 segg.                                    |
| Contrasto del display                      | 14 segg.                                        |                                               |                                             |
| Controllo del riscaldamento                | 36                                              | Nozioni generali                              | 19 segg.                                    |
| Controllo delle interfacce                 | 31, 35 segg.                                    |                                               |                                             |
| Controllo di sicurezza                     | 49                                              | Opzioni                                       | 2, 4, 8, 51                                 |
| Controllo riscaldamento                    | 31, 35 segg.                                    | Ora                                           | 8, 13, 33 segg.                             |
| Criteri finali                             | 25                                              |                                               |                                             |
| Criterio di spegnimento                    | 20 segg., 37, 45                                | Parametri di essiccazione                     | 2, 24, 50                                   |
| Cura                                       | 48 segg.                                        | Password generale                             | 12, 14, 54, Allegato                        |
|                                            |                                                 | Password                                      | 2, 12, 14 segg., 54                         |
| Dati tecnici                               | 50                                              | Peso iniziale                                 | 10, 24 segg., 37, 50                        |
| Descrizione dei tasti                      | 9                                               | Preparazione del campione                     | 21 segg.                                    |
| Dichiarazione di Conformità                | 52                                              | Programma di riscaldamento                    | 2, 11, 24 segg., 50                         |
| Disimballaggio                             | 5                                               | Programmi di essiccazione                     | 12, 14, 25, 38                              |
| Display                                    | 2, 6, 9 segg., 14 seg., 37, 43                  | Programmi                                     | 2, 12, 14, 25 segg., 38, 50                 |
|                                            |                                                 | Pulizia                                       | 2, 4, 8, 22, 48                             |
| Entrata/modifica della password            | 14                                              |                                               |                                             |
| Equipaggiamento fornito                    | 5                                               | Regolazione del riscaldamento                 | 31                                          |
| Esempi                                     | 10 segg., 13, 15 seg., 16, 18, 26 segg., 40     | Regolazione del sistema di pesatura           | 31                                          |
|                                            |                                                 | Regolazione                                   | 31 segg., 46                                |
| Essiccazione delicata                      | 24 seg.                                         | Riparazioni                                   | 48                                          |
| Essiccazione standard                      | 24 segg.                                        |                                               |                                             |
| Fine dell'analisi                          | 24 segg.                                        | Schema di assegnazione dei pin                | 44                                          |
| Formato dei dati in entrata                | 42                                              | Schema di collegamento                        | 45                                          |
| Formato dei dati in uscita                 | 40                                              | Segnale acustico                              | 14 seg., 17                                 |
|                                            |                                                 | Servizio                                      | 48, 51                                      |
| Garanzia                                   | 5                                               | Sincronizzazione                              | 43                                          |
|                                            |                                                 | Sistema di funzionamento                      | 9                                           |
| Handshake via software                     | 17, 43                                          | Smaltimento                                   | 5                                           |
| Handshake                                  | 14 seg., 17, 39, 43, 46, 50                     | Sostituire i fusibili                         | 46, 50                                      |
|                                            |                                                 | Stampa risultato provvisorio                  | 25                                          |
| Immissione alfabetica                      | 9                                               | Stampa                                        | 15, 18, 20, 26, 29, 34                      |
| Immissione numerica                        | 9                                               | Stampante                                     | 2, 5, 7 segg., 11, 14, 33 segg., 37, 39, 51 |
| Immissione testi                           | 9                                               |                                               |                                             |
| Impostazione dei parametri dello strumento | 14                                              | Tastiera                                      | 2, 5 segg.                                  |
| Impostazione della data                    | 8                                               | Temperatura di essiccazione                   | 10, 38, 47                                  |
| Impostazione della lingua                  | 8, 13                                           | Temperatura di Standby                        | 25 seg.                                     |
| Impostazione di fabbrica                   | 12 segg., 17, 24, 27, 39                        | Tempo di preriscaldamento                     | 7, 46                                       |
|                                            |                                                 | Tensione di rete                              | 5, 7, 48, 50                                |
| Impostazioni                               | 13 segg., 27                                    | Test dell'hardware                            | 31, 35 segg.                                |
| Incrostazioni del campione                 | 23                                              |                                               |                                             |
| Indice                                     | 3                                               | Unità di riscaldamento                        | 4 segg., 7, 48, 51,                         |
| Informazioni specifiche dello strumento    | 18                                              | Uscita dati                                   | 11, 37, 43, 46                              |
| Ingresso digitale                          | 42                                              | Uscita digitale                               | 40                                          |
| Interfaccia dati                           | 6 segg., 7, 11, 37, 39 segg., 46                | Uso previsto                                  | 2                                           |
|                                            |                                                 |                                               |                                             |
| Interfaccia                                | 9, 11, 14 segg., 31, 35 segg., 39 segg., 46, 50 | Visione d'insieme dello strumento (prospetto) | 6                                           |

# Password generale

## Entrata/modifica della password

- Selezionare l'impostazione:  
Selezionare **SETUP** nella riga di funzione  
Tasto  oppure 
  - Premere il tasto 
  - > Appare **SETUP** con le righe di menù
  - Selezionare per es. Parametri dello strumento: premere il tasto , confermare con il tasto 
  - > Appare la richiesta della password.
- | SETUP                | PASSWORD                                                                           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Immissione password: |  |
- Immettere ogni carattere della password generale con i tasti  oppure  e confermare con il tasto 
  - Confermare il valore inserito con il tasto 
  - Visualizzare i parametri dello strumento: premere i tasti  e 
  - > I parametri dello strumento appaiono sul display:

- Selezionare Password:  
premere il tasto 
- > Appare la password e in caso il valore esistente per la password
- Nuova password: immettere ogni carattere della nuova password con i tasti  oppure  e confermare con il tasto 
- Cancellazione della password dell'operatore: immettere un carattere vuoto e confermare: premere il tasto 
- Uscire dall'impostazione:  
premere 2 volte il tasto 
- > Riavvio dell'applicazione

**Password generale:**  
**40414243**



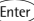
## Istruzioni in breve

# Sartorius MA150



sartorius

### Prospetto dei tasti

-  Accensione/spegnimento  
Accende o spegne lo strumento; dopo lo spegnimento: funzionamento Standby
-  Clear Function  
Nel modo di analisi: interrompe/annulla la funzione (per es. taratura)  
Nel menù: cancella l'immissione, uscita dai livelli di menù
-  ENTER  
Nel modo di analisi: avvia la funzione selezionata (per es. tara, avvio, interruzione)  
Nel menù: registrazione dell'impostazione/immissione selezionata



In basso/indietro  
Nel menù: selezione della voce di menù successiva nello stesso livello  
Durante l'immissione alfanumerica: visualizzazione della cifra o carattere successivo inferiore




In alto/avanti  
Nel menù: selezione della voce di menù precedente nello stesso livello  
Durante l'immissione alfanumerica: visualizzazione della cifra o carattere successivo superiore



Stampa  
I valori di lettura o i protocolli vengono emessi tramite l'interfaccia dati su una stampante esterna

## Analizzatore d'umidità



Accensione: tasto 

Selezione del programma di essiccazione:

Selezionare la funzione **PROGRAMMA**:

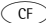
Tasto  e tasto 


Selezionare il programma **P1 ... P20** con il


tasto  e il tasto 

Per annullare la richiesta di immissione della password: tasto 


Uscita dalla selezione del programma:


2 volte il tasto 

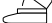
Apertura della camera per campioni: 


Collocazione del piattello portacampione: 

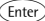Taratura del piattello portacampione:

funzione **TARA** e tasto 

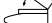Pesata iniziale: 


Chiusura della camera per campioni: 

Avvio: Funzione **AVVIO** e tasto  o direttamente dopo la chiusura della camera per campioni



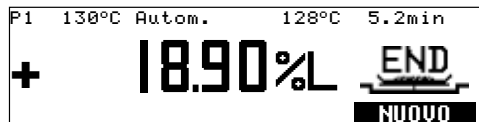Essiccazione in corso: aspettare



Lettura del risultato









## Impostazione (SETUP)

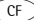Accensione: selezionare la funzione **SETUP** con i tasti  e  e confermare



Selezione del livello di menù: tasti , 

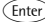Uscita dal livello di menù o **SETUP**:  
tasto 


Selezione ed impostazione dei parametri:  
tasti ,  e 




- Lingua
  - Tedesco
  - Inglese
  - Modo U.S.
  - Francese
  - Italiano
  - Spagnolo
- Parametri dello strumento
  - Password
  - ID utente
  - Interfaccia
  - Protocollo essiccazione
  - Orologio
  - Contrasto lettore
  - Segnale acustico
  - Funzione commutatore esterno
  - Impostazione di fabbrica
- isoTEST
  - Regolazione del sistema di pesata
  - Test dell'hardware
- Informazioni dati strumento

## Parametri di essiccazione (PROGRAMMA)

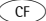Accensione: selezionare la funzione **PROGRAM.** con i tasti  e  e confermare

Selezionare il programma P1 ... P20

Uscita dal livello di menù o **PROGRAMMA:** tasto 

Selezione ed impostazione dei parametri: tasti ,  e 

- Nome programma
- Programma di riscaldamento
  - Essiccazione standard
  - Essiccazione delicata
- Temperatura standby
- Barra grafica (peso iniziale)
- Avvio dell'analisi
  - Tasto Enter, con stabilità
  - Chiusura coperchio, senza stabilità
  - Chiusura coperchio, con stabilità
- Fine dell'analisi
  - Automatico
  - Semiautomatico assoluto
  - Semiautomatico percentuale
  - Tempo
  - Manuale
- Lettura del risultato
  - Umidità (%L)
  - Sostanza secca (%R)
  - Rapporto (%LR)
  - Perdita peso (mg)
  - Residuo (g)
  - Residuo (g/kg)
  - Grammi/Litri (g/l)
- Stampa risultato provvisorio
- Determinazione contenuto in ceneri
- Righe d'intestazione
- Impostazione di fabbrica

Sartorius Weighing Technology GmbH  
Weender Landstrasse 94–108  
37075 Goettingen, Germania

Tel. +49.551.308.0  
Fax +49.551.308.32 89  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

Copyright by Sartorius Goettingen,  
Repubblica Federale Tedesca.  
Senza l'autorizzazione scritta della  
Sartorius non è consentita la  
riproduzione o traduzione in parte o  
in tutto. La Sartorius si riserva tutti  
i diritti, conformemente alla normativa  
sui diritti d'autore.  
Le informazioni e le illustrazioni contenute  
nelle presenti istruzioni sono aggiornate  
alla data sotto indicata.  
La Sartorius si riserva di apportare  
modifiche alla tecnica, alla dotazione  
e alla forma degli apparecchi rispetto alle  
informazioni e alle illustrazioni contenute  
nelle presenti istruzioni.

Data:  
Marzo 2012,  
Sartorius Weighing Technology GmbH,  
Goettingen, Germania